

# Cochlear™ True Wireless™ TV Streamer (émetteur audio TV)


## Guide de poche pour les utilisateurs d'implants Cochlear



### Fonctions de votre émetteur audio TV

- Profitez d'un son audio de haute qualité diffusé directement sur votre processeur à partir de votre téléviseur, appareil stéréo, ordinateur ou autre appareil similaire.
- Compatible avec les entrées analogiques et numériques.
- Se reconnecte automatiquement si vous quittez la pièce et revenez dans les 5 minutes.
- Installez-le et oubliez-le, cliquez sur un seul bouton pour regarder la télévision.

*L'émetteur audio TV se branche sur une prise murale ordinaire et se branche directement sur votre appareil audio. L'émetteur audio TV diffuse le son stéréo via vos processeurs jusqu'à une distance de 7 mètres.*

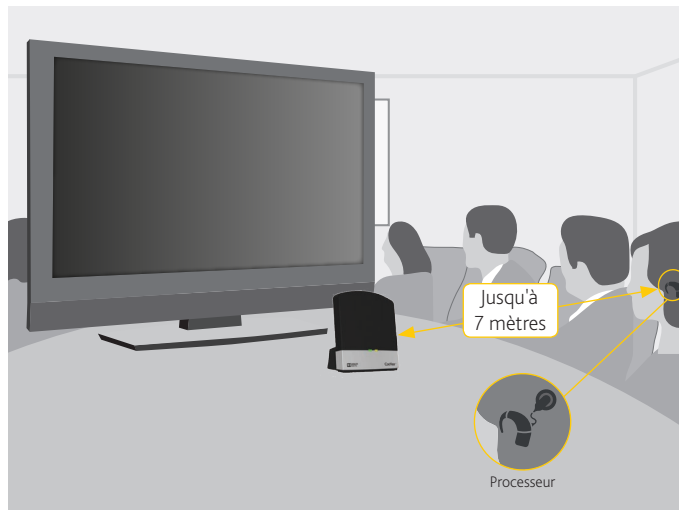

### Vue d'ensemble du produit



### Premiers pas

#### Ajustement du volume

##### Comment :

Pour modifier le volume, utilisez la commande du volume sur l'émetteur audio TV.

Avant de modifier les paramètres, assurez-vous que vos processeurs sont confortablement ajustés. Dans la plupart des cas, il suffit de réaliser cet ajustement une seule fois car l'émetteur audio TV enregistre le dernier niveau de volume réglé.

#### Commande mono/stéréo

##### Comment :

Le commutateur mono/stéréo à deux positions peut être utilisé pour régler la diffusion stéréo ou mono.

Pour les réglages bilatéraux, le commutateur doit être de préférence réglé sur la position stéréo.


Pour les réglages unilatéraux, il doit être réglé sur la position mono.

## Appariement avec votre processeur

- A** Branchez votre émetteur audio TV à la prise secteur à l'aide du cordon d'alimentation et de la prise micro-USB.




- B** Branchez le câble audio sur la mini-prise jack d'entrée audio sur votre émetteur audio TV et connectez-le à la source audio.

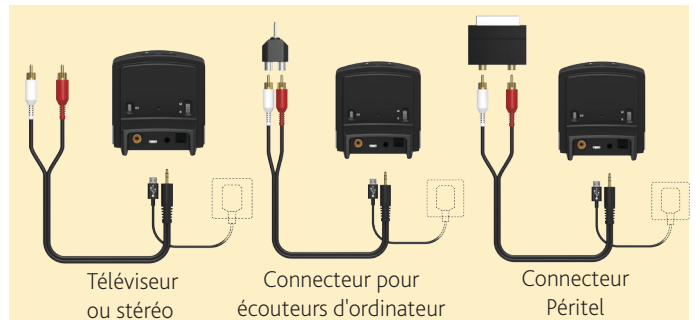

- C** Arrêtez votre/vos processeur(s).


Retirez votre/vos processeur(s).  
**Arrêtez** votre/vos processeur(s).

- D** Appuyez une fois sur le bouton d'appariement de votre émetteur audio TV.

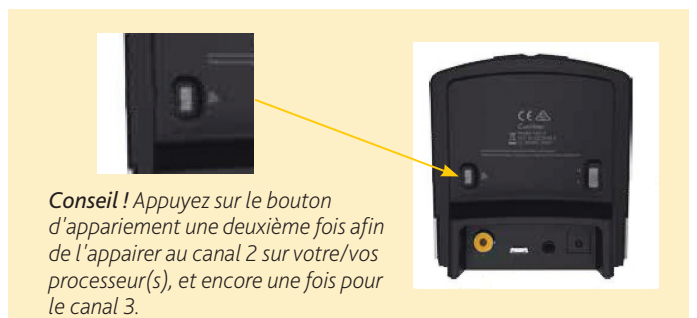


- E** Votre émetteur audio TV est en mode d'appariement.

Le témoin lumineux d'activité clignote en orange et vous disposez de 20 secondes pour appairer votre processeur.

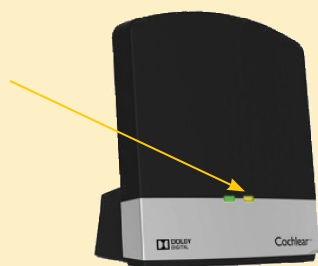

- F** Lorsque le mode d'appariement est actif, démarrez votre processeur.

**Démarrez** votre/vos processeur(s).

Le témoin lumineux clignote brièvement en bleu  pour indiquer que l'appariement a réussi.

## Assistance

Pour en savoir plus sur l'émetteur audio TV, veuillez consulter le mode d'emploi qui a été livré avec votre émetteur audio TV ainsi que le mode d'emploi des accessoires True Wireless.

Pour en savoir plus sur votre processeur Cochlear, veuillez consulter le mode d'emploi s'y rapportant.


Pour plus d'assistance et pour visionner des vidéos, rendez-vous sur le site Internet de Cochlear : [www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

## Utilisation de votre émetteur audio TV

### Démarrage de la diffusion à l'aide de votre processeur

**A** Démarrez votre processeur et votre émetteur audio TV.

Appuyez sur la touche de votre processeur et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, puis relâchez-la.

Le témoin lumineux de votre processeur clignote en bleu  pour indiquer que la diffusion est en cours.

**REMARQUE :** pour les processeurs dotés de deux touches, utilisez la touche du haut.

**B** Pour sélectionner un autre canal ou arrêter la diffusion.

Répétez l'étape A une deuxième fois pour sélectionner le canal 2, et encore une fois pour le canal 3.

Pour arrêter la diffusion, appuyez brièvement sur la touche de votre processeur.

### Démarrage de la diffusion à l'aide de votre assistant sans fil

**Méthode 1 :** démarrez votre processeur et votre émetteur audio TV. Démarrez votre assistant sans fil.



Appuyez sur la touche boucle à induction et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, puis relâchez-la.


*Conseil ! Répétez cette étape une deuxième fois pour sélectionner le canal 2, et encore une fois pour le canal 3.*

Le contenu audio commencera à être diffusé via l'émetteur audio TV.

Pour arrêter la diffusion, appuyez brièvement sur la touche boucle à induction.

OU

**Méthode 2 :** démarrez votre processeur et votre émetteur audio TV. Démarrez votre assistant sans fil.

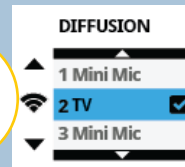

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche vers la droite jusqu'à ce que l'écran Diffusion s'affiche.

Faites défiler la liste jusqu'au canal que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur OK.

Lorsque l'appareil audio est allumé, le contenu audio commence à être diffusé via l'émetteur audio TV.

Pour arrêter la diffusion, sélectionnez Désactivé sur l'écran de sélection Diffusion.

### Démarrage de la diffusion à l'aide de votre télécommande

Démarrez votre processeur et votre émetteur audio TV. Démarrez votre télécommande.



Appuyez sur la touche boucle à induction et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, puis relâchez-la.


Lorsque l'appareil audio est allumé, le contenu audio commence à être diffusé via l'émetteur audio TV.

Répétez cette étape une deuxième fois pour sélectionner le canal 2, et encore une fois pour le canal 3.

Pour arrêter la diffusion, appuyez brièvement sur la touche boucle à induction.

### Démarrage de la diffusion à l'aide de l'application Nucleus Smart

Démarrez votre processeur et votre émetteur audio TV. Lancez l'application Nucleus Smart.

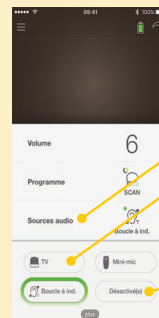

Appuyez sur Sources audio.

Appuyez sur l'icône TV.

Le contenu audio commencera à être diffusé via l'émetteur audio TV.

Pour arrêter la diffusion, appuyez sur Désactivé(e) ou sur l'icône X.

#### Cochlear True Wireless Accessories:

**Cochlear Bone Anchored Solutions AB** Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden  
Tel +46 31 792 44 00 Fax +46 31 792 46 95

#### Nucleus Sound Processor Systems:

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia  
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia  
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

#### Regional Offices:

**Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany  
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

**Cochlear Americas** 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

**株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)** 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)