

Cochlear™ Wireless TV Streamer (Audio Transmitter)


Kurzanleitung für Anwender der CP900 Serie




Die Merkmale Ihres Audio Transmitter

- Sie hören die Audioübertragung Ihres Fernsehers, Hi-Fi-Systems, Computers oder ähnlichen Geräts in hoher Qualität direkt über Ihren Soundprozessor der CP900 Serie.
- Sowohl analoge als auch digitale Eingangssignale werden unterstützt.
- Wenn Sie den Raum verlassen und innerhalb von 5 Minuten zurückkehren, erfolgt die erneute Verbindungsaufnahme automatisch.
- Einfach installieren – und nach einem Tastendruck können Sie bereits den Fernsehton hören.

Der Audio Transmitter wird an eine Netzsteckdose und direkt an Ihr Audiogerät angeschlossen. Die Übertragung über den Audio Transmitter erfolgt als Stereoton zu Ihren Soundprozessoren bis zu einer Entfernung von 7 Metern.

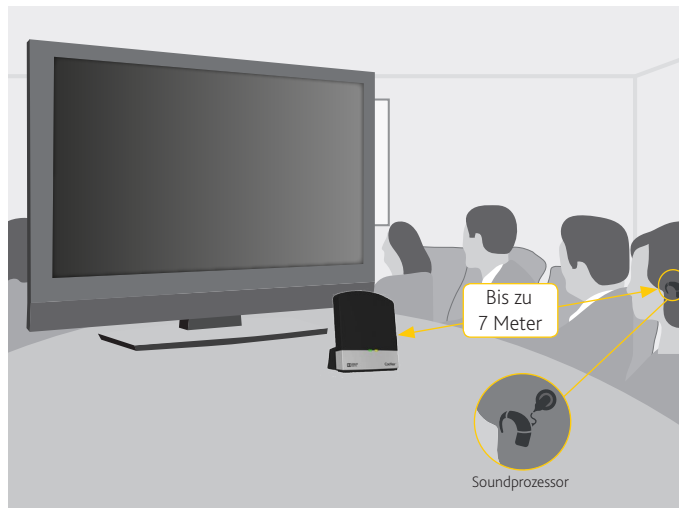

Produktübersicht

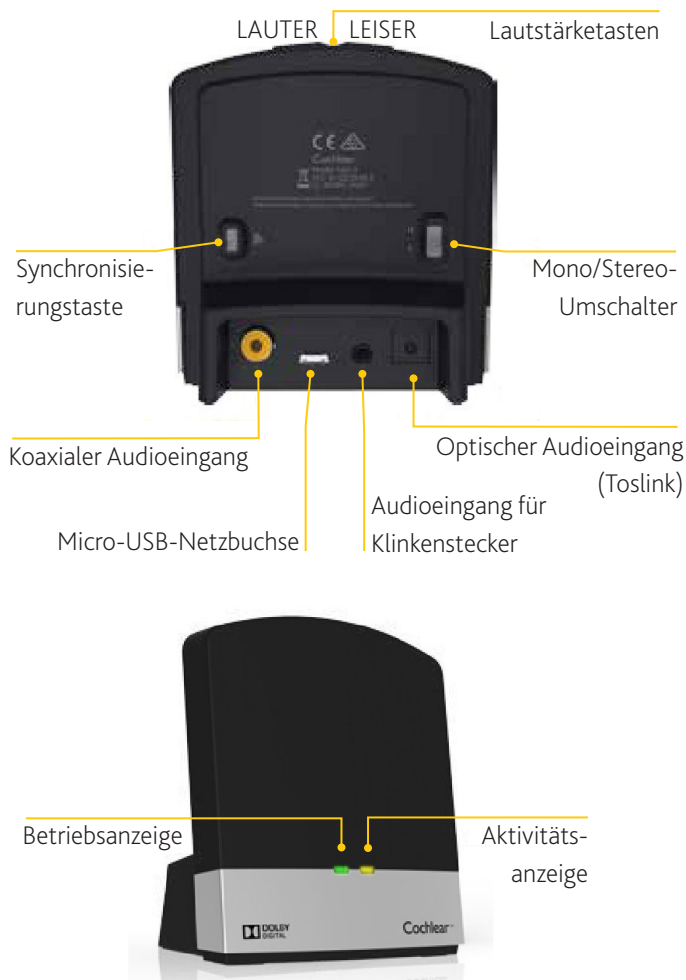

Erste Schritte

Einstellen der Lautstärke

Empfohlene Vorgehensweise:

Passen Sie die Lautstärke über die Lautstärketasten des Audio Transmitter an. Die Soundprozessoren sollten auf eine angenehme Lautstärke eingestellt sein, bevor Sie über die Lautstärketasten die Einstellung anpassen. In den meisten Fällen muss diese Anpassung nur einmal vorgenommen werden, da der Audio Transmitter die zuletzt eingestellte Lautstärke speichert.

Mono/Stereo-Einstellung

Empfohlene Vorgehensweise:


Über den Mono/Stereo-Umschalter lässt sich einstellen, ob die Audioübertragung mono oder stereo erfolgt. Bei einer bilateralen Versorgung sollte Stereoübertragung gewählt werden. Bei unilateraler Versorgung sollte Monoübertragung eingestellt werden.

Synchronisieren mit Ihrem Soundprozessor der CP900 Serie


- A** Stecken Sie das Netzteil des Audio Transmitter in eine Netzsteckdose und das Kabel in den Micro-USB-Anschluss des Audio Transmitter.




- B** Stecken Sie das Audiokabel in den Klinkenstecker-Audioeingang Ihres Audio Transmitter und das andere Ende in die Audioquelle.

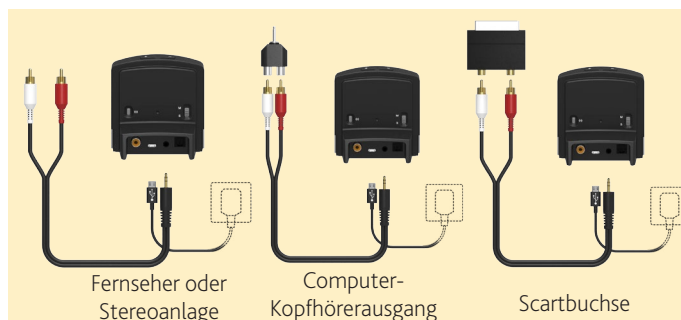


- C** Schalten Sie Ihren Soundprozessor der CP900 Serie aus.

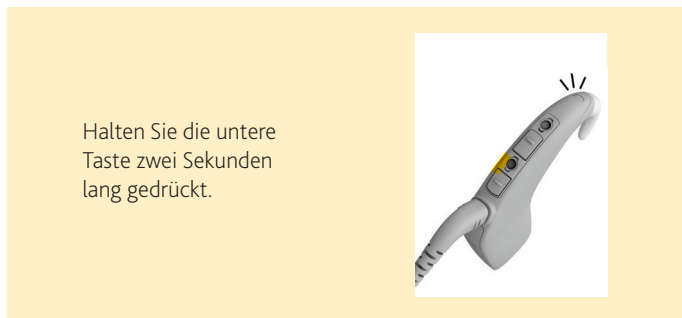


- D** Drücken Sie einmal auf die Synchronisierungstaste des Audio Transmitter.

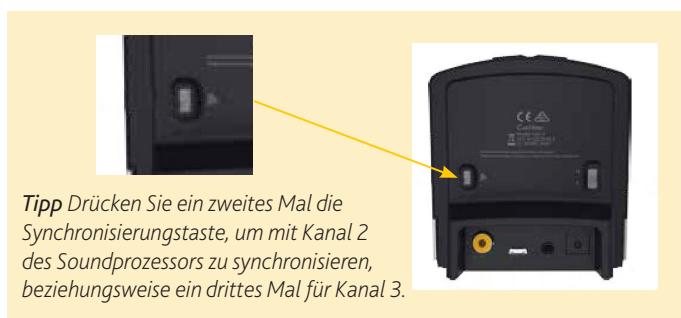

- E** Ihr Audio Transmitter ist nun im Synchronisierungsmodus.

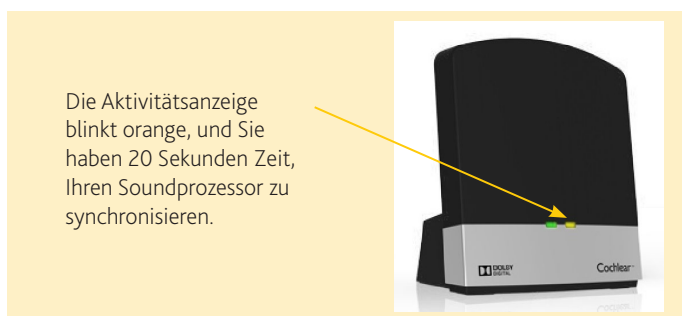

- F** Schalten Sie den Soundprozessor wieder ein, während sich der Audio Transmitter im Synchronisierungsmodus befindet.

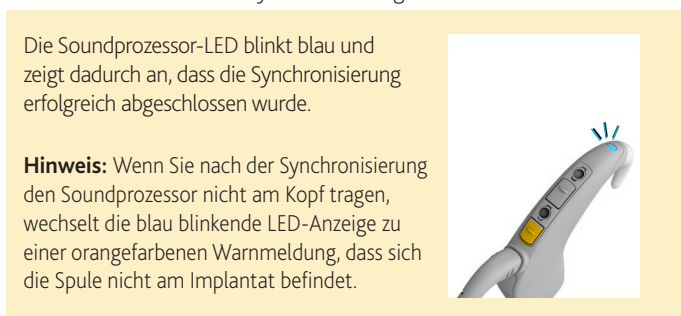

Support

Einzelheiten zu Ihrem Audio Transmitter entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch, das Sie mit dem Audio Transmitter erhalten haben, sowie dem Benutzerhandbuch für das Wireless-Zubehör.

Einzelheiten zu Ihrem Cochlear Soundprozessor der CP900 Serie enthält das entsprechende Benutzerhandbuch.

Weitere Hilfestellungen und Videos finden Sie auf der Cochlear Webseite: www.cochlear.com.

Verwenden des Die Merkmale Ihres Audio Transmitter

Starten der Audioübertragung direkt am Soundprozessor

A Schalten Sie den Soundprozessor und den Audio Transmitter ein.



Halten Sie die obere Taste des Soundprozessors lange gedrückt.
Die Soundprozessor-LED blinkt blau und zeigt so an, dass die Audioübertragung läuft.

B So wählen Sie einen anderen Kanal oder beenden die Übertragung:



Drücken Sie ein zweites Mal lange auf die obere Taste, damit Kanal 2 ausgewählt wird, beziehungsweise ein weiteres Mal für Kanal 3.

Zum Beenden der Audioübertragung drücken Sie kurz auf die obere Taste.

Starten der Audioübertragung mit Hilfe der CR230 Fernbedienung

Methode 1: Schalten Sie den Soundprozessor und den Audio Transmitter ein. Schalten Sie die CR230 Fernbedienung ein.



Halten Sie die Telefospulentaste lange gedrückt.

Tipp Drücken Sie ein zweites Mal lange auf die Taste, damit Kanal 2 ausgewählt wird, beziehungsweise ein weiteres Mal für Kanal 3.

Wenn Ihr Audiogerät eingeschaltet ist, beginnt die Übertragung über den Audio Transmitter.

Zum Beenden der Audioübertragung drücken Sie kurz auf die Telefospulentaste.

Methode 2: Schalten Sie den Soundprozessor und den Audio Transmitter ein. Schalten Sie die CR230 Fernbedienung ein.



ODER

Drücken Sie vom Startbildschirm ausgehend so oft die Rechtspfeil-Taste, bis der Bildschirm „Audioübertragung“ angezeigt wird.

Scrollen Sie in der Liste nach unten zum Kanal, den Sie verwenden möchten, und drücken Sie dann **OK**.

Wenn Ihr Audiogerät eingeschaltet ist, beginnt die Übertragung über den Audio Transmitter.

Die Übertragung lässt sich durch Auswahl von **Aus** im Auswahlbildschirm „Audioübertragung“ beenden.

Starten der Audioübertragung mit Hilfe der CR210 Bedienung

A Schalten Sie den Soundprozessor und den Audio Transmitter ein. Schalten Sie Ihre CR210 Bedienung ein.



Halten Sie die Telefospulentaste lange gedrückt.

Wenn Ihr Audiogerät eingeschaltet ist, beginnt die Übertragung über den Audio Transmitter.

B So wählen Sie einen anderen Kanal oder beenden die Übertragung:



Drücken Sie ein zweites Mal lange auf die Telefospulentaste, damit Kanal 2 ausgewählt wird, beziehungsweise ein weiteres Mal für Kanal 3.

Zum Beenden der Audioübertragung drücken Sie kurz auf die Telefospulentaste.

Cochlear Wireless Accessories:

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus in chinesischen Zeichen, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, das elliptische Logo sowie Whisper sind Marken beziehungsweise eingetragene Marken von Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix und WindShield sind Marken beziehungsweise eingetragene Marken von Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

© Cochlear Limited 2015