


Application Nucleus[®] Smart

pour iPhone[®] et iPod touch[®]

P832154 Version 3.0

Mode d'emploi du processeur Kanso[®] 2

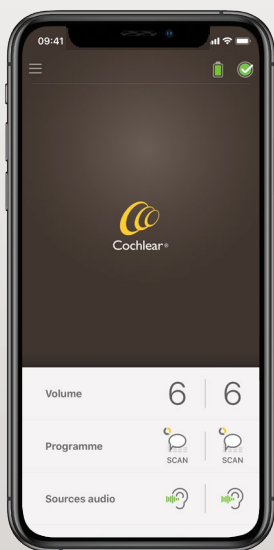

Hear now. And always



Cochlear[®]

Pour commencer !

L'application Nucleus Smart est conçue pour vous permettre d'effectuer les réglages de votre processeur Kanso® 2 (notamment modifier le volume ou les programmes et sélectionner les sources audio) et de surveiller les niveaux de batterie ainsi que de recevoir des alertes en cas de problèmes avec votre processeur.

Étape		Page
1	Téléchargez l'application Nucleus® Smart depuis l'App Store® sur votre iPhone ou votre iPod touch*	–
2	IMPORTANT ! Jumelage de votre/vos processeur(s) avec votre appareil Reportez-vous au Guide de jumelage du processeur <i>Kanso® 2 pour iPhone/iPod touch</i>	–
3	Exécutez l'application Nucleus Smart	3
4	Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter et configurer l'application	–
5	Lancez l'application !	6

* L'application Cochlear Nucleus Smart est disponible sur l'App Store et sur Google Play. Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consultez le site www.cochlear.com/compatibility.

Principe du jumelage

Jumelage de votre/vos processeur(s).....	2
Déconnexion de votre/vos processeur(s).....	2

Utilisation

Utilisation de l'application Nucleus Smart.....	3
Utilisation avec Apple Watch	4
Écran d'accueil.....	6
Contrôle d'un ou de deux processeurs	7
Réglage du volume.....	9
Changement de programme	10
Diffusion d'un contenu audio.....	11
Réglage du contenu audio diffusé	12
Réglage de la sensibilité.....	13
Réglage des basses et hautes fréquences	14
Réglage de la limite du volume global	15
Utilisation de ForwardFocus	16
Contrôle de l'état.....	18
Vérification du son.....	20
Menu Paramètres	23
Dépannage.....	26

Pour plus d'informations, reportez-vous au *mode d'emploi du processeur Kanso® 2*.

Pour des conseils, des vidéos explicatives ou d'autres informations, consultez le site : www.cochlear.com/

Jumelage de votre/vos processeur(s)

Vous devez jumeler votre/vos processeur(s) avec votre appareil (par exemple, iPhone, iPod touch) pour pouvoir utiliser les fonctions de communication et de contrôle de l'application.



REMARQUE

Vous pouvez jumeler votre processeur avec 5 appareils compatibles au maximum, mais vous ne pouvez le contrôler qu'avec un seul à la fois.



AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité, prenez garde lorsque vous connectez votre processeur à des appareils comme des smartphones ou des tablettes. Ne le connectez qu'à des appareils protégés, par mot de passe ou code PIN, par exemple. Évitez de le connecter à des appareils dont le système d'exploitation a été modifié.

Pour des instructions détaillées étape par étape, reportez-vous au *Guide de jumelage du processeur Kanso® 2 pour iPhone/iPod touch*.

Déconnexion de votre/vos processeur(s)


Si vous changez de processeur(s), par exemple si vous recevez un nouveau processeur suite à une réparation, vous devez :

- tout d'abord, **déconnecter** le ou les anciens processeurs,
- puis, **jumeler** le ou les nouveaux processeurs.

Pour des instructions détaillées étape par étape, reportez-vous au *Guide de jumelage du processeur Kanso® 2 pour iPhone/iPod touch*.

Utilisation de l'application Nucleus Smart

1. Appuyez sur l'icône **Nucleus Smart** pour démarrer l'application.

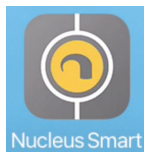

2. **Configurez l'application.** Lors de la première utilisation de l'application, une série d'écrans vous guide dans la configuration.



REMARQUE

Vous devrez vous connecter à l'application à l'aide de votre compte Cochlear.

Utilisation avec Apple Watch

L'application Nucleus Smart peut être utilisée sur votre Apple Watch si votre montre est jumelée à votre iPhone.*

Après l'installation et la configuration de l'application Nucleus Smart sur votre iPhone, vérifiez votre Apple Watch pour voir si l'application Nucleus Smart s'est installée automatiquement. Si ce n'est pas le cas, utilisez l'application Watch de votre iPhone pour sélectionner et installer l'application Nucleus Smart.

Pour utiliser l'application sur votre Apple Watch :

- Démarrez l'application sur votre iPhone.
- Gardez votre Apple Watch près de votre iPhone.


Vous pouvez modifier les réglages disponibles sur votre Apple Watch ou votre iPhone ; un changement sur l'un sera répercuté sur l'autre.

Si l'écran de votre iPhone est éteint, les alertes d'application s'affichent sur votre Apple Watch.

Si votre iPhone est éteint, l'application Apple Watch affiche un message.


* Les fonctions de l'application Nucleus Smart sur Apple Watch ne sont pas disponibles dans certaines zones. Si elles ne sont pas disponibles, un message s'affiche dans l'application de votre Apple Watch.

Si votre iPhone est allumé, mais que l'application n'est pas en cours d'exécution, Apple Watch affiche ce message :

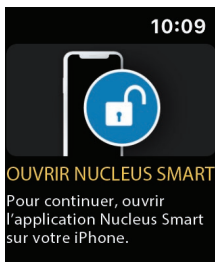

Un sous-ensemble de fonctions de l'application Nucleus Smart est disponible sur votre Apple Watch. Les écrans pour l'Apple Watch sont inclus, le cas échéant, dans les pages suivantes.


Écran d'accueil

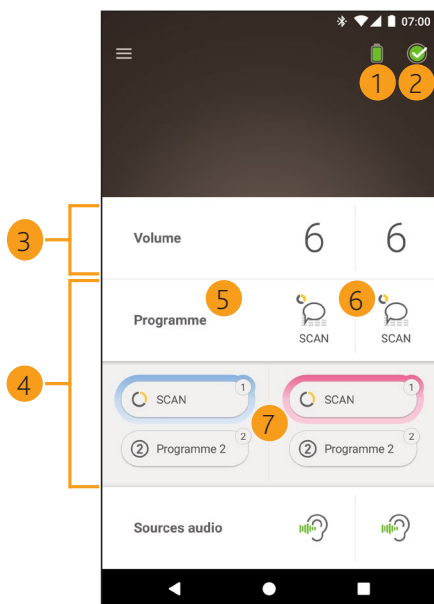

- 1 Niveau de charge de la batterie du processeur
- 2 État du processeur
- 3 Panneau de configuration (fermé)
- 4 Panneau de configuration (ouvert)
- 5 Nom du paramètre de réglage
- 6 Valeur actuelle du paramètre de réglage
- 7 Contrôles du paramètre de réglage

Contrôle d'un ou de deux processeurs

Une barre verte et une commande s'affichent si **un seul** processeur est appairé.

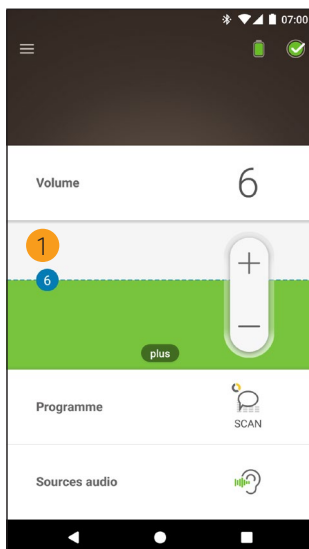


- 1 Valeur par défaut (définie par le régleur). Cette valeur peut varier selon le programme et les différents processeurs.

Si **deux processeurs sont jumelés**, vous pouvez les contrôler simultanément (un seul bouton de commande) ou séparément (deux boutons, comme indiqué ci-dessous) :

- Les commandes de gauche sont bleues.
- Les commandes de droite sont rouges.



Pour les modifier, utilisez le *Menu Paramètres* (voir page 23).

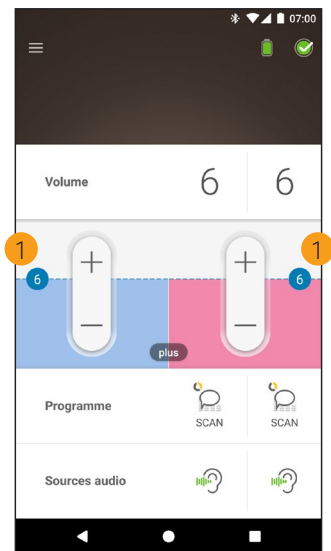

- 1 Valeur par défaut (définie par le régleur). Cette valeur peut varier selon le programme et les différents processeurs.



Réglage du volume

1. Appuyez sur **Volume** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Appuyez sur **+ / -** pour modifier le volume.

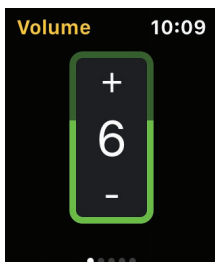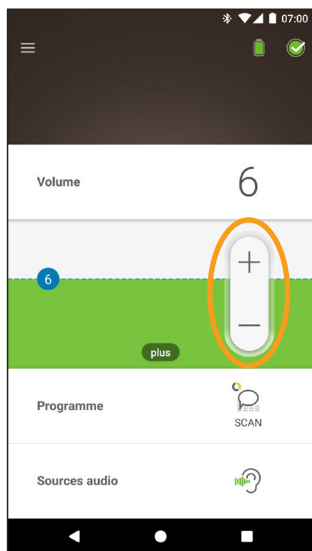


Changement de programme

1. Appuyez sur **Programme** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Appuyez sur l'icône correspondant au programme que vous souhaitez utiliser.

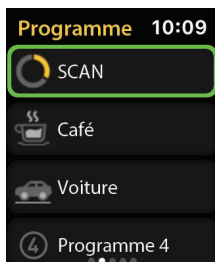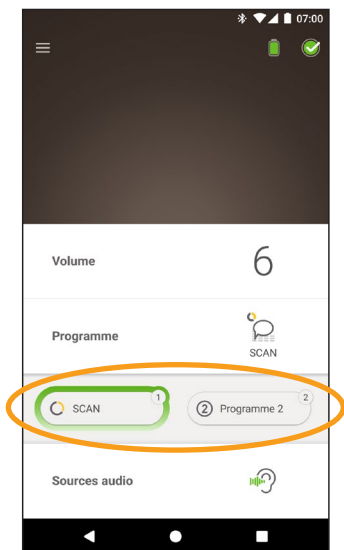

Diffusion d'un contenu audio

1. Appuyez sur **Sources audio** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Appuyez sur l'**icône** de la source audio que vous souhaitez utiliser.

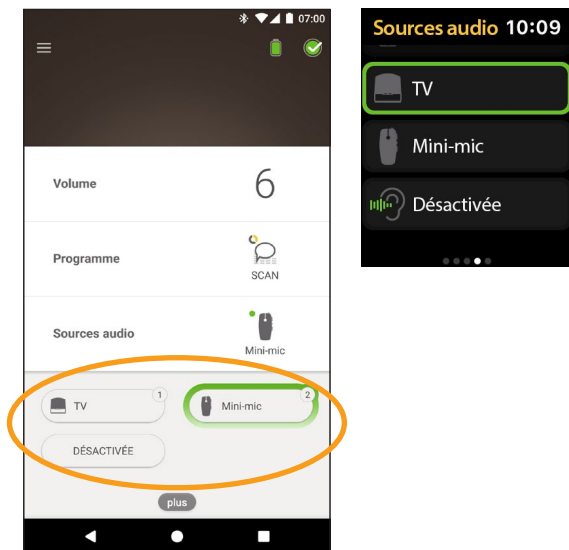

CONSEIL

Appuyez sur **Désactivée** ou sur **X** pour arrêter la diffusion audio et revenir au programme précédent.

Réglage du contenu audio diffusé


Vous pouvez modifier séparément le volume du contenu audio diffusé et du son des microphones de votre processeur.



REMARQUE

Les paramètres de la source audio reviennent à leur valeur par défaut lorsque vous arrêtez votre processeur.

1. Démarrez la diffusion à partir d'une source audio.
2. Appuyez sur **plus** pour ouvrir le panneau de configuration **Paramètres de la source audio**.
3. Appuyez sur **+ / -** pour modifier les paramètres.

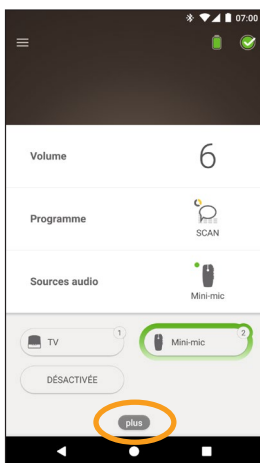

4. Appuyez sur **X** en haut à gauche pour fermer le panneau de configuration **Paramètres de la source audio**.



Réglage de la sensibilité



REMARQUE

- L'accès au réglage de la sensibilité n'est possible que s'il est activé par votre régleur.
- La sensibilité revient à sa valeur par défaut lorsque vous arrêtez votre processeur.

1. Appuyez sur **Volume** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Appuyez sur **plus** pour ouvrir le panneau de configuration mySmartSound.
3. Appuyez sur **+ / -** pour modifier la sensibilité.

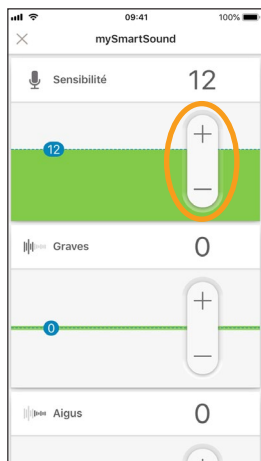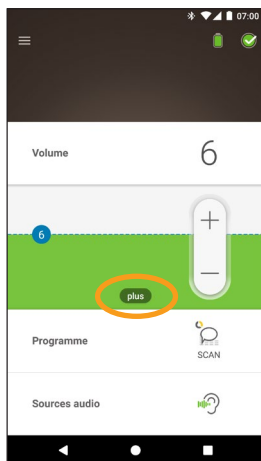

4. Appuyez sur **X** en haut à gauche pour fermer le panneau de configuration mySmartSound.

Réglage des basses et hautes fréquences



REMARQUE



L'accès au réglage des basses et hautes fréquences n'est possible que s'il est activé par votre régleur.



AVERTISSEMENT

Procédez à ces ajustements uniquement lorsque vous percevez des sons ou des conversations. Une augmentation des basses ou hautes fréquences peut être à l'origine de sons forts ou de sensations d'inconfort sur les niveaux élevés. Si cela se produit, retirez immédiatement le processeur/l'antenne, et réduisez les niveaux des basses ou hautes fréquences avant de le/la remettre en place.

1. Appuyez sur **Volume** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Appuyez sur **plus** pour ouvrir le panneau de configuration **mySmartSound**.
3. Appuyez sur **+ / -** pour modifier les graves ou les aigus.

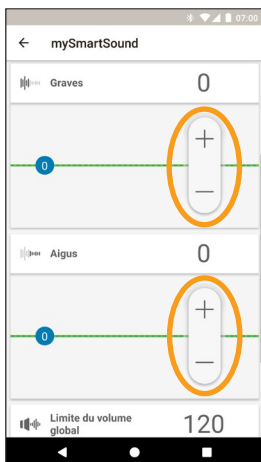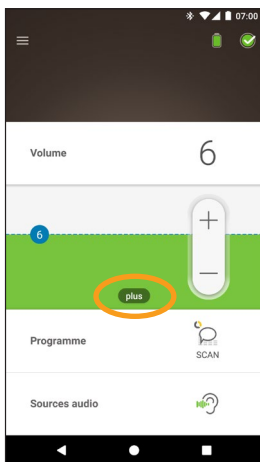

4. Appuyez sur **X** en haut à gauche pour fermer le panneau de configuration **mySmartSound**.

Réglage de la limite du volume global



REMARQUE



L'accès au réglage de la limite du volume global n'est possible que s'il est activé par votre régleur.



AVERTISSEMENT

Procédez à ces ajustements uniquement lorsque vous percevez des sons ou des conversations. Une augmentation de la limite du volume global peut être à l'origine de sons très forts ou de sensations d'inconfort sur les niveaux élevés. Si cela se produit, retirez immédiatement le processeur/l'antenne, et réduisez la limite du volume global avant de le/la remettre en place.

1. Appuyez sur **Volume** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Appuyez sur **plus** pour ouvrir le panneau de configuration **mySmartSound**.
3. Appuyez sur **+ / -** pour modifier le volume global.

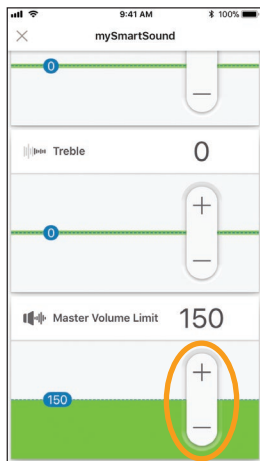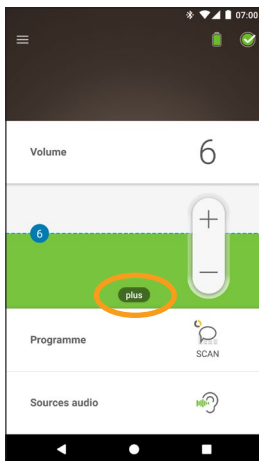

4. Appuyez sur **X** en haut à gauche pour fermer le panneau de configuration **mySmartSound**.

Utilisation de ForwardFocus

ForwardFocus est une fonction supplémentaire qui permet de réduire le bruit émis derrière vous, et vous permet ainsi de vous concentrer sur les conversations en face à face dans un environnement bruyant tel qu'un café.



L'option ForwardFocus n'est disponible que si elle est activée par votre régleur. Une fois cette fonction activée, vous en avez le contrôle et pouvez l'activer et la désactiver selon vos besoins.

Lorsque vous utilisez ForwardFocus, essayez de vous assurer que les bruits parasites proviennent de derrière vous.

N'oubliez pas de désactiver la fonction lorsque vous changez d'environnement d'écoute, par exemple lorsque vous passez d'un café bruyant à une pièce calme.

Si vous êtes le soignant d'un enfant, vous devez discuter avec votre régleur pour connaître la pertinence de cette fonction. Il est important que votre enfant puisse signaler le moment où ForwardFocus n'est plus nécessaire et où les programmes habituels doivent être utilisés.

1. Appuyez sur **Programme** pour ouvrir le panneau de configuration correspondant.
2. Activez **ForwardFocus**.


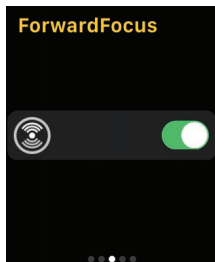
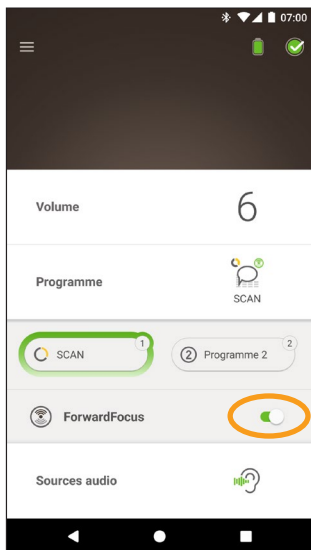


REMARQUE

Si vous éteignez votre processeur, l'option ForwardFocus se désactive et vous devrez l'activer de nouveau lorsque vous en aurez besoin.


Contrôle de l'état

Appuyez sur l'icône pour ouvrir l'écran État.

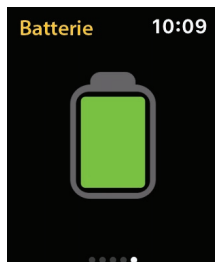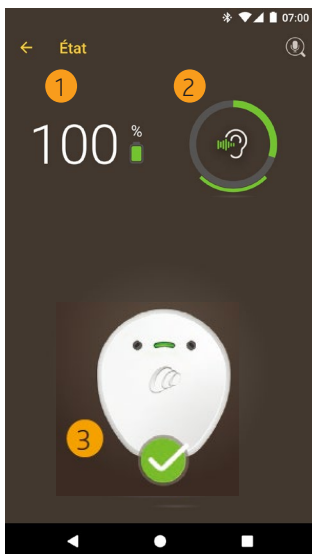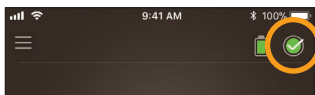

- 1 Niveau de charge de la batterie du processeur.
- 2 Niveau sonore fourni au processeur. L'icône affiche la source (par ex., des microphones, une boucle à induction, un accessoire sans fil). La barre colorée indique le niveau.
- 3 Indicateur d'état du processeur :
 - Une coche verte indique l'absence de panne

Si votre processeur présente une panne, un écran s'affiche, comme celui figurant ci-dessous :

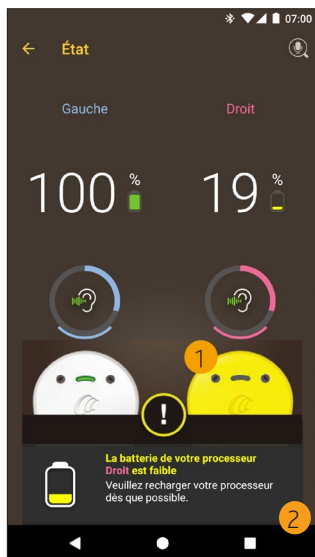

- 1 La partie du processeur présentant une panne s'affiche en jaune.
- 2 Description de la panne et solution suggérée.


Vérification du son



REMARQUES


- Assurez-vous que vous êtes dans un endroit calme à l'écart des fours à micro-ondes, des routeurs sans fil ou d'autres appareils susceptibles de provoquer des interférences.
- Placez le smartphone à proximité de votre processeur, sans rien entre les deux (murs, meubles, tête).
- Prenez garde à la confidentialité : Vérification du son enregistre le son du microphone de votre processeur. Les enregistrements sont stockés sur votre smartphone (ils ne sont pas stockés par Cochlear).

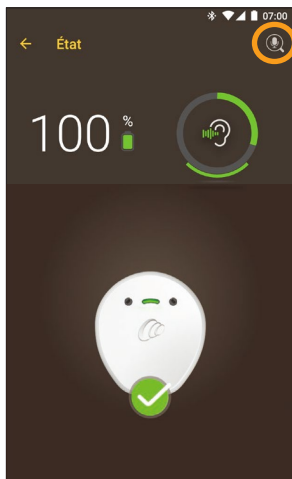

Sur l'écran **État**, appuyez sur l'icône du **microphone** pour lancer la Vérification du son.*



* Disponible uniquement sur les smartphones compatibles. Pour obtenir des informations, consultez le site www.cochlear.com/compatibility.

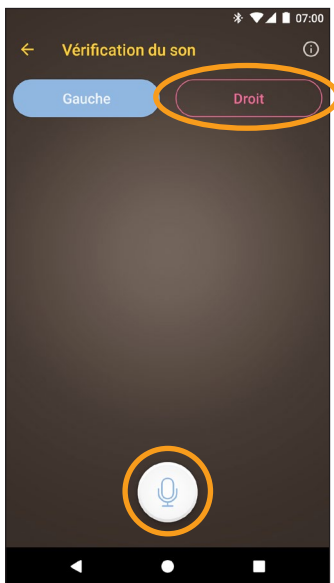1. Si vous avez deux processeurs, **Gauche** est sélectionné. Pour enregistrer le processeur droit, appuyez sur **Droit**.



2. Appuyez sur le bouton **Microphone** pour lancer l'enregistrement.
3. Appuyez sur le bouton **Arrêter**  pour terminer l'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton **Lecture**  pour écouter votre enregistrement.





REMARQUES

- Pendant l'enregistrement, le voyant du processeur s'allume en bleu fixe.
- Une séquence de 5 tonalités retentit au début de l'enregistrement et un bip à la fin.
- 30 secondes correspond à la durée d'enregistrement maximale.
- Le temps d'enregistrement écoulé s'affiche au-dessus du bouton.
- La qualité des haut-parleurs de votre smartphone et de votre casque affecte la qualité sonore lors de la lecture.

Menu Paramètres


Appuyez sur l'icône **menu** en haut à gauche de l'écran pour ouvrir le menu **Paramètres**.

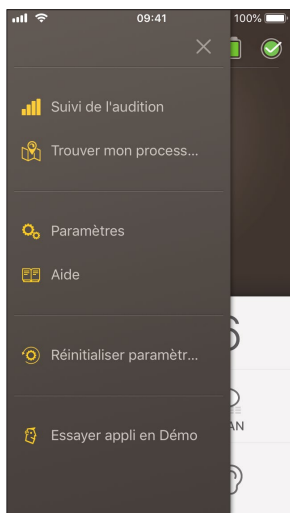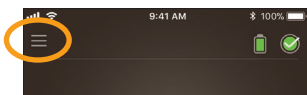

Appuyez sur **Réinitialiser paramètres régleur** pour modifier les paramètres de votre processeur et revenir aux paramètres définis par votre régleur.

Appuyez sur **Essayer application en Démo** pour découvrir comment utiliser l'application sans affecter votre/vos processeur(s).*

Appuyez sur **Paramètres** pour ouvrir l'écran **Paramètres** :

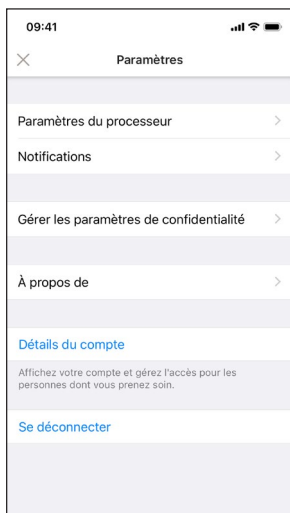

* Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans votre version de l'application.

Appuyez sur **Paramètres du processeur** pour :

- Définir des témoins lumineux
- Activer/Désactiver les bips.

Appuyez sur **Notifications** pour activer/désactiver les notifications.

Appuyez sur **Contrôle bilatéral** pour choisir de contrôler deux processeurs simultanément ou séparément.*

* Cette fonction n'est peut-être pas disponible dans votre version de l'application.

Dépannage

Contactez votre régulateur si vous avez le moindre doute quant au fonctionnement ou à la sécurité de votre processeur.

Problème	Solution
Vous avez du mal à vous connecter à l'application	<ol style="list-style-type: none">1. Redémarrez votre processeur.2. Redémarrez l'application.3. Redémarrez l'appareil qui exécute l'application.
Vous ne recevez pas les notifications	Vérifiez que l'application est bien ouverte sur votre appareil.

Ce logiciel remplit les exigences essentielles présentées dans l'annexe 1 de la directive CE 90/385/CEE relative aux dispositifs médicaux implantables actifs selon la procédure d'évaluation de conformité visée à l'annexe 2.



L'autorisation d'apposer le marquage CE a été accordée en 2017.

Déclaration légale

Les déclarations de ce guide sont considérées comme avérées et correctes à la date de publication. Les spécifications peuvent toutefois être modifiées sans avis préalable.

© Cochlear Limited 2020

Hear now. And always

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7700

Cochlear Americas 10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Canada Inc 2500-120 Adelaide Street West, Toronto, ON M5H 1T1, Canada
Tel: +1 416 972 5082 Fax: +1 416 972 5083

Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 205 8204 Fax: +41 61 205 8205

Cochlear Europe Ltd 6 Dashwood Lang Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey KT15 2HJ, United Kingdom
Tel: +44 1932 26 3400 Fax: +44 1932 26 3426

Cochlear Benelux NV Schaliënhoedredreef 20 i, B-2800 Mechelen, Belgium
Tel: +32 15 79 55 11 Fax: +32 15 79 55 70

Cochlear France S.A.S. 135 Route de Saint-Simon, 31035 Toulouse, France
Tel: +33 5 34 63 85 85 (International) or 0805 200 016 (National) Fax: +33 5 34 63 85 80

Cochlear Italia S.r.l. Via Larga 33, 40138 Bologna, Italy
Tel: +39 051 601 53 11 Fax: +39 051 39 20 62

Cochlear Nordic AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 335 14 61 Fax: +46 31 335 14 60

Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.

Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1, Kavacık, TR-34805 Beykoz-Istanbul, Turkey
Tel: +90 216 538 5900 Fax: +90 216 538 5919

Cochlear (HK) Limited Room 1404-1406, 14/F, Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong
Tel: +852 2530 5773 Fax: +852 2530 5183

Cochlear Korea Ltd 1st floor, Cheongwon Building 33, Teheran-ro 8 gil, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Tel: +82 2 533 4450 Fax: +82 2 533 8408

Cochlear Medical Device (Beijing) Co., Ltd

Unit 2608-2617, 26th Floor, No.9 Building, No.91 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R. China
Tel: +86 10 5909 7800 Fax: +86 10 5909 7900

Cochlear Medical Device Company India Pvt. Ltd.

Ground Floor, Platina Building, Plot No C-59, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051, India
Tel: +91 22 6112 1111 Fax: +91 22 6112 1100

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

Cochlear Middle East FZ-LLC

Dubai Healthcare City, Al Razi Building 64, Block A, Ground Floor, Offices IR1 and IR2, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 818 4400 Fax: +971 4 361 8925

Cochlear Latinoamérica S.A.

International Business Park, Building 3835, Office 403, Panama Pacifico, Panama
Tel: +507 830 6220 Fax: +507 830 6218

Cochlear NZ Limited

Level 4, Takapuna Towers, 19-21 Corno St, Takapuna, Auckland 0622, New Zealand
Tel: + 64 9 914 1983 Fax: 0800 886 036

www.cochlear.com



ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Slimline, SmartSound, Softip, SPrint, True Wireless, le logo en forme d'ellipse et Whisper sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha SoftWear, BCDrive, DermaLock, EveryWear, SoundArc, Vistafix et WindShield sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Bone Anchored Solutions AB. App Store, Apple, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

© Cochlear Limited 2020

D1718024 ISS1

French translation of DI639970 ISS4 APR20

