

# Cochlear™

## Nucleus® CR230

### リモートアシスタント クイックガイド

- ☑ はじめに
- ☑ クイックリファ  
レンス



Hear now. And always



# 概要

Cochlear™ Nucleus® ( コクレア・ニュークレアス ) CR230 リモートアシスタントを使って、Cochlear Nucleus CP910、CP920、および Kanso® ( カンソ ) (CP950) サウンドプロセッサの操作と状態の確認ができます。サウンドプロセッサを2台お使いの場合、リモートアシスタントで両方のサウンドプロセッサを操作することができます。

## アドバイス

詳細情報と警告については、「CR230 リモートアシスタント取扱説明書」を参照してください。



# CR230 リモートアシスタント



視聴

プログラム  
ボタン  
テレコイル  
ボタン

プログラム  
ボタン  
ボタン操作  
ロック

プログラム  
ボタン

プログラム  
ボタン  
ホームボタン

上下矢印ボタン  
(設定の調整用)


OK ボタン  
(選択用)

左右矢印ボタン  
(画面の移動用)

USB ケーブル  
ソケット

クイックガイド

# 画面の移動

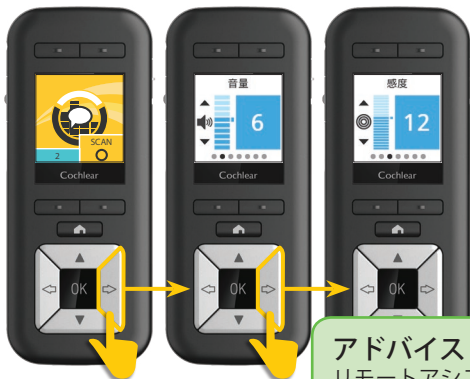

画面の移動には左右の矢印ボタンを使用します。

## アドバイス

リモートアシスタントの設定によって、表示される画面は異なります。

# ホーム



ホームボタンを使って  
ホーム画面に戻ります。



# 状態を確認する

## ヒント

サウンドメータを使って、サウンドプロセッサまたはアクセサリが正常に機能しているかを確認します。



サウンドメータはサウンドプロセッサのマイクロホンが拾っている音の大きさを表します

サウンドプロセッサの電池残量

緑色は正常に動作していることを示します

ホーム画面で OK ボタンを押すと、サウンドプロセッサの状態が表示されます。

# スリープ状態からの復帰

リモートアシスタントをし  
ばらく操作し  
ないと、「ス  
リープ」状態  
になります。  
いずれかのボ  
タンを押す  
と、スリープ  
状態から復帰  
します。




# リモートアシスタントの充電

充電には3つの方法があります。

- A** Cochlear™  
Nucleus® 充電  
器と Cochlear™  
Nucleus® 充電  
キットを使用  
する。

- または **B** Cochlear™  
Nucleus® CR200  
シリーズ充電  
キットを使用  
する。

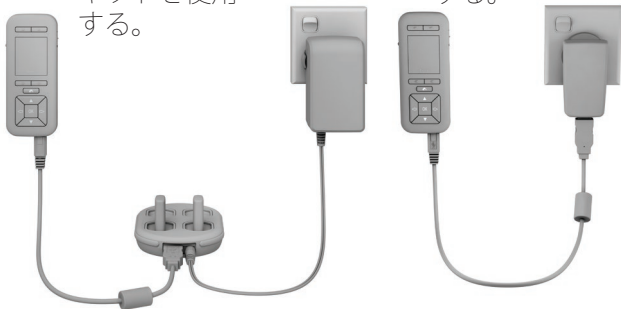

または **C** コンピュータの USB  
ポートを使用する



# 電源を入れる



OK ボタンを長押しして電源を入れます。

# 電源を切る



電源を入れる

OK ボタンを長押しします。  
[ 電源を切る ] を選択します。

# ロック / ロック解除



## ボタン操作ロック

上にスライドするとロックが解除され、下にスライドするとロックされます。

## ヒント

ボタン操作ロックを使うと、リモートアシスタントの電池残量を表示できます。





電源を入れる

# プログラムの変更

病院の先生にプログラムを 4 つまで設定してもらうことができます。プログラムの切り替えにはプログラムボタンを使います。



# 設定の調整

上下矢印ボタンを使って、音量、感度、低音、高音などの設定を調整します ( 病院の先生の設定による )。



上 矢 印  
ボ タ ン

下 矢 印  
ボ タ ン

## ヒント

音量 ( または設定  
されている場合は  
感度 ) をホーム画面  
から直接調整するに  
は、上または下矢印  
ボタンを押します。

# SCAN プログラム

SCAN プログラム ( 病院の先生が設定した場合 ) は周囲の環境を識別して、現在の聴取環境に合わせてサウンドプロセッサを自動的に調整します。



現在、SCAN プログラムを選択していることを示す



## SCAN プログラムアイコン

SCAN プログラムが識別した、現在いる場所の周囲の聴取環境がアイコンで表示されます。



SCAN オン



静寂下



雑音



話し声



話し声  
(雑音下)



風



音楽

# ワイヤレスアクセサリ

Cochlear True Wireless™ ( コクレア・トゥルーワイヤレス ) アクセサリ ( ミニマイクロホンやテレビストリーマー ) をサウンドプロセッサとペア設定すると、リモートアシスタントで音声ストリーミングを開始 / 停止できます。

1



1回  
押すと  
オン



## 電源を入れる

ミニマイクロホンまたはテレビストリーマーを起動するには、テレコイルボタンを1回長押しします。

## アドバイス


フーンクリップのコントロールを使用すると、電話の発信や応答ができます。



使用する

## 2


## 使用する

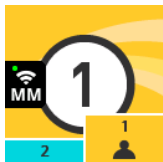**ミニマイクホンを起動**

ミニマイクホンからサウンドプロセッサに音声が入力されます。

**テレビストリーマーを起動**

テレビストリーマーからサウンドプロセッサに音声が入力されます。

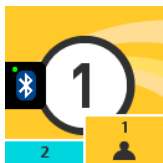**フォンクリップを起動**

フォンクリップからサウンドプロセッサに音声が入力されます。

3

1回  
押すと  
オフ



## 停止する

ミニマイクロホンまたはテレビストリーマーを停止するには、テレコイルボタンを1回長押しします。



使用する

# プラグインオーディオアクセサリ

プラグインオーディオアクセサリをサウンドプロセッサに接続すると、すぐに音声サウンドプロセッサに送信されます。

リモートコントロールでアクセサリを停止 / 再起動できます。

1



1回  
押すと  
オン



## 電源を入れる


テレコイルボタンを1回短く押すと、プラグインオーディオアクセサリが起動します。



使用する

2

## 使用する

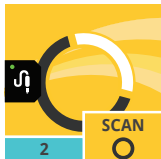

### プラグインオーディオアクセサリを起動

プラグインオーディオアクセサリからサウンドプロセッサに音声がストリーミングされます。

3

1回  
押すと  
オフ



## 停止する

テレコイルボタンを1回短く押すと、プラグインオーディオアクセサリが停止します。



使用する

# テレコイル

テレコイル機能を使用すると、磁気ループからの音やテレコイル対応電話の声を聴くことができます。テレコイル機能には手動によるテレコイルとオートテレコイル(利用できる場合)があり、使用するためには病院の先生にサウンドプロセッサを設定してもらう必要があります。オートテレコイルを起動すると、磁気ループの範囲内にいる時や、テレコイル対応の電話を使う時に、音声信号が自動的に検知されます。

1



1回  
押すと  
テレコイル

2回  
押すと  
オート  
テレコイル



## 電源を入れる

### テレコイル

テレコイルボタンを  
1回短く押すと、テレ  
コイルが起動します。

### オートテレコイル

テレコイルボタンを  
2回短く押すと、オート  
テレコイルが起動  
します。



使用する



### テレコイル オン

サウンドプロセッサに内蔵されたテレコイルが作動中です。



### オートテレコイル オン (受信中)

オートテレコイルがオンで、サウンドプロセッサが磁気ループまたは電話の通信範囲内にいて信号を検知し、受信している状態です。



### オートテレコイル オン (スタンバイ)

オートテレコイルがオンですが、サウンドプロセッサが磁気ループまたは電話からの信号を検知していない状態です。

3



1回押  
すと  
オフ



## 停止する

テレコイルボタンを1回短く押すと、テレコイルまたはオートテレコイルが停止します。



使用する

# アドバンスモード

リモートアシスタントは初期設定では、シンプルモードに設定されています。必要に応じて、アドバンスモードに切り替えると、サウンドプロセッサとリモートアシスタントの設定を調整することができます。

アドバンスモードへ切り替えるには：



OK ボタンを長押しします。

メニューが表示されたら、下矢印ボタンを押して**[アドバンスモード]**を強調表示します。

OK ボタンを押します。



使用する

# アドバンスモードでの 設定の調整

必要に応じて、アドバンスモードを使って詳細な設定を調整できます。設定のリセット方法については、36 ページの「サウンドプロセッサの設定のリセット」を参照してください。

アドバンスモードで設定を調整するには

## アドバイス

設定の調整中にホーム画面に戻るには、ホームボタンを2回押します。





使用する

右矢印ボタンを押して  
**[設定]**画面に  
移動します。

OKボタンを押  
してアドバ  
ンスモードでの  
設定を開始し  
ます。

上下矢印ボ  
タンを使って  
設定を調整し  
ます。

# ペア設定

ペア設定を行うと、2つの機器間の通信ができるようになります。通常は、使用を開始する前に病院の先生にリモートアシスタントのペア設定をしてもらいますが、ご自分でペア設定を行う必要がある場合があるかもしれません（たとえば、リモートアシスタントの代替機を受け取った場合など）。

リモートアシスタントに**「ペア設定されていません」**と表示された場合



## アドバイス

サウンドプロセッサを2台お使いの場合、2台目のサウンドプロセッサに対して手順1と2を繰り返す必要があります。



送信コイル/サウンドプロセッサをリモートアシスタントの裏面にあてます。サウンドプロセッサの電源が入っていることを確認します。

クイックガイド



OK ボタンを押します。



# サウンドプロセッサの 設定のリセット

必要に応じて、リモートアシスタントを使って、サウンドプロセッサを病院の先生が設定した状態にリセットすることができます。

サウンドプロセッサの設定をリセットするには：



OK ボタンを  
長押しします。

メニューが表示  
されたら、下矢  
印ボタンを押し  
て[**設定のリ  
セット**]を強調  
表示します。

OK ボタンを  
押します。



メモ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

メモ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**ECIREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

**Cochlear Americas**

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

**株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

**www.cochlear.com**

販売名 : Nucleus 6 人工内耳システムサウンドプロセッサ

承認番号 : 22500BZX00513000

販売名 : Kanso サウンドプロセッサ

承認番号 : 22900BZX00220000

Cochlear、「Hear now. And always」、Nucleus および楕円形のロゴは、  
Cochlear Limited の商標または登録商標です。

© Cochlear Limited 2017

*Hear now. And always*

466336 ISS3

Japanese translation of 472009 ISS4 JUL17