

Cochlear™

Nucleus®

CP910/CP920

サウンドプロセッサ
クイックガイド



- ☑ はじめに
- ☑ クイックリファレンス

Hear now. And always



概要

Cochlear™ Nucleus® (コクレア・ニュークレアス) CP910/CP920 サウンドプロセッサは、人工内耳システムのインプラントと併用することにより耳に音を伝えます。

アドバイス

詳細情報と警告については、「CP910/CP920 サウンドプロセッサ取扱説明書」を参照してください。



サウンドプロセッサ

マイクロホン
とカバー

表示ランプ

アップボタン

ダウンボタン

イヤフック

シリアル番号

送信コイル

マグネット

送信
ケーブル

プロセシ
ングユニ
ット

プラグイン
アクセサリ
ソケット


(CP910 のみ)
スタンダー
ド充電池



観察

電池のロック/ ロック解除

充電池をお子さまが外してしまわないように、CP910 または CP920 プロセッシングユニットにロックしてください。

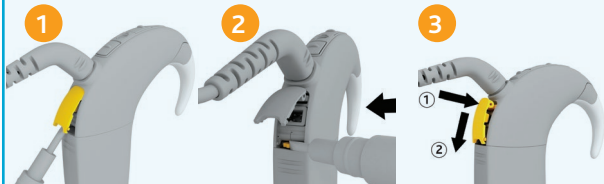


アクセサリ
ソケットカ
バーを慎重に
開きます
(CP910 のみ)。


左はロック、
右はロック
解除です。

上部のちょうつ
がいを先に押し
込んでから、カ
バーを閉じます
(CP910 のみ)。

充電電池の取り外し/ 取り付け

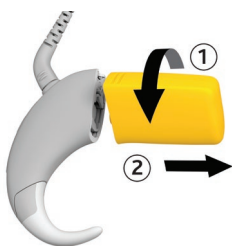

取り外し

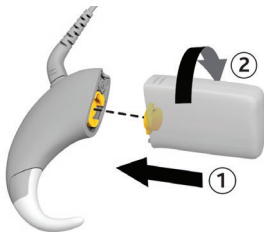

取り付け

サウンドプロセッサ
は自動的に電源が入り
ます。




充電電池の充電



充電電池を Cochlear Nucleus 充電器のソケットに、角度を付けて差し込みます。時計回りにひねります。

充電器を電源アダプタに接続し、電源アダプタを電源コンセントに差し込みます。

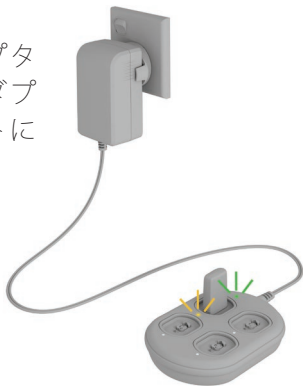

ランプ

意味



充電池を充電中です。

オレンジ色の点灯



充電池の充電が完了しました。

緑色の点灯




電源


空気亜鉛電池の交換



保護ロックを反時計回りに回して保護ロック付き電池カバーのロックを解除します (時計回りに回すとロックされます)。

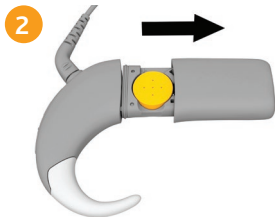

スライドして開きます。

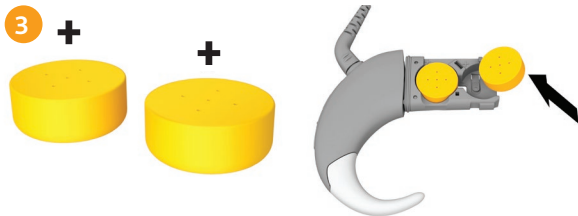

2 個の新しい使い捨て
p675 高出力空気亜鉛電池 (酸化銀電池またはアルカリ電池は不可) を、
平らな面を上にして挿
入します。

サウンドプロセッサ
は自動的に電源が入
ります。

電源を入れる/切る

電池を接続するか、
ダウンボタンを短く
押すと電源が入り
ます。

ダウンボタンを長押
しすると(約2秒間)
電源が切れます。



ダウン
ボタン

サウンドプロセッサ のボタンのロック

ボタンをロック /
ロック解除する
には、両方のボ
タンを同時に短
く押して放しま
す。(オレンジ
色のランプはボ
タンがロックさ
れたことを示し
ます。)



プログラムの変更

プログラムを変更するには、ダウンボタンを短く押して放します。



アラーム音または**緑色**
の点滅の回数 (病院の
先生が設定した場合)
はプログラム番号を示
します。



ワイヤレスアクセサリ

Cochlear ワイヤレスアクセサリ (ミニマイクホン、テレビストリーマー、フォンクリップ) を使用すると、ワイヤレス音声入力をサウンドプロセッサで受信できます。

アドバイス

音声ストリーミングする前に、ワイヤレスアクセサリをサウンドプロセッサとペア設定する必要があります。詳しくは、「Cochlear ワイヤレスアクセサリ取扱説明書」を参照してください。



アドバイス

フォンクリップのコントロールを使用すると、電話の発信や応答ができます。





アップボタンを長押しすると、ミニマイクロホンまたはテレビストリーマーによる音声のストリーミングが開始します。

短く押すとオフになります。



青色 : ワイヤレスアクセサリが 音声をストリーミングしています。

緑色 : マイクロホンが動作中です。

ヒント

もう一度長押しするたびに、ペア設定された次のワイヤレスアクセサリに順次切り替わります。



プラグインオーディオ アクセサリ (CP910 のみ)



アクセサリ
ソケットカ
バーを慎重に
開きます。



アクセサリコネ
クタをアクセサ
リソケットに差
し込みます。



アクセサリケー
ブルのもう一方
の端を、音楽プ
レーヤーなど対
応する機器に差
し込みます。

ヒント

プラグインオーディオアクセサリが接続されている時は、アップボタンを短く押してプラグインオーディオアクセサリとマイクロホンを切り替えることができます。



使用

テレコイル

テレコイル機能を使用すると、磁気ループからの音やテレコイル対応電話の声を聴くことができます。テレコイル機能には手動によるテレコイルとオートテレコイルがあり、使用するためには病院の先生にサウンドプロセッサを設定してもらう必要があります。オートテレコイルでは、音声信号が自動的に検知されます。テレコイル対応電話の使用時や磁気ループの通信範囲内に入った時は、オートテレコイルが「受信中」に切り替わります。磁気ループの通信範囲外に出た時など信号を受信しない場合、オートテレコイルは「スタンバイ」(受信なし)に切り替わります。

アップボタンを短く押すと、手動によるテレコイルのオンとオフが切り替わります。

青色：テレコイル / アクセサリが動作中です。

緑色：マイクロホンが動作中です。



ランプ

日常の使用時

ランプ	意味
	テレコイル / オーディオアクセサリからの音声を受信中に、サウンドプロセッサの表示ランプが点滅します (病院の先生が設定した場合)。
	マイクロホンからの音声を受信中に、サウンドプロセッサの表示ランプが点滅します (病院の先生が設定した場合)。
	起動中で、プログラムを変更しています。 点滅回数は現在のプログラム番号を示します。
	サウンドプロセッサの電源を切っています。

ボタンのロック

ランプ	意味
	サウンドプロセッサのボタンをロックしています。
	サウンドプロセッサのボタンをロック解除しています。
	サウンドプロセッサのボタンがロックされています。



ワイヤレスアクセサリ

ランプ	意味
	ワイヤレスアクセサリとのペア設定が成功しました。

テレコイル / プラグインオーディオアクセサリ

ランプ	意味
	マイクロホンからテレコイル / プラグインオーディオアクセサリへ切り替えています。
	テレコイル / プラグインオーディオアクセサリからマイクロホンへ切り替えています。

警告

ランプ	意味
	送信コイルが頭部から外れている（または誤ったインプラントに接続されている）場合、サウンドプロセッサの表示ランプが点滅します。
	サウンドプロセッサの充電池が電池切れです。充電してください。
	エラーです。病院の先生にご連絡ください。問題が解決するまで点灯したままになります。





Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear、「Hear now.And always」、Nucleus および楕円形のロゴは、
Cochlear Limited の商標または登録商標です。

© Cochlear Limited 2015

Hear now. And always

466351 ISS2

Japanese translation of 402592 ISS7 MAR15