

Cochlear™ Wireless Phone Clip (コクレアワイヤレスフォンクリップ) CP900 シリーズ装用者用クイックガイド



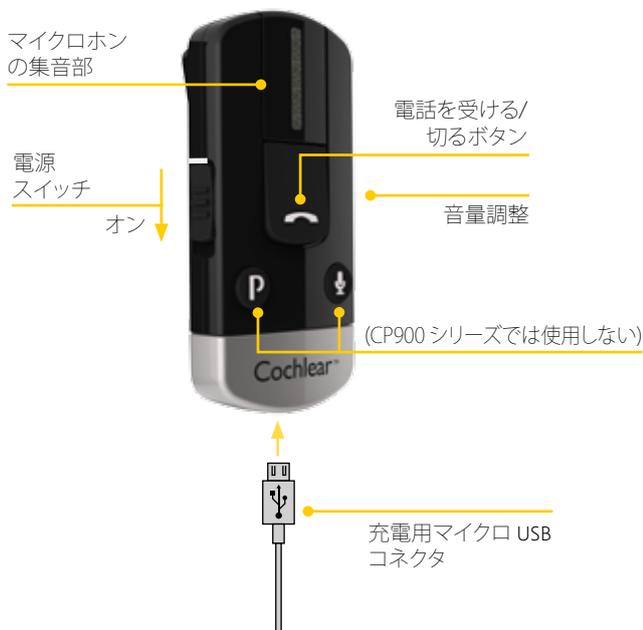
フォンクリップの機能

- CP900 シリーズサウンドプロセッサでハンズフリー通話をお楽しみいただけます。
- Bluetooth® 対応のナビゲーションシステムからの音声を聞くことができます。
- Bluetooth 対応機器から音楽をストリーミングすることができます。

フォンクリップは衣服に簡単に装着できます。内蔵マイクロホンにより、電話が数メートル離れていても音声を拾って送信できます。



製品の概要



はじめに

電池の充電

付属のマイクロ USB 充電ケーブルの片方の端をフォンクリップに差し込み、もう一方の端をコンピュータに差し込むか、付属のアダプタを使用して電源コンセントに差し込みます。充電が完了すると、フォンクリップ上部の赤色に点灯していた LED ランプが緑色に点灯し、2 秒ごとに赤色に点滅します。フォンクリップを使用する前に、表示ランプがフル充電を示している場合でも、最低 3 時間充電してください。電池が過充電することはありません。

アドバイス: フル充電した場合、フォンクリップの音声通信可能時間は 6 時間、スタンバイ時の電池保持時間は 80 時間です。

CP900 シリーズ サウンドプロセッサとのペア設定

- A** CP900 シリーズ サウンドプロセッサの電源を切ります。

サウンドプロセッサを耳から取り外します。
ダウンボタンを 2 秒間長押しします。



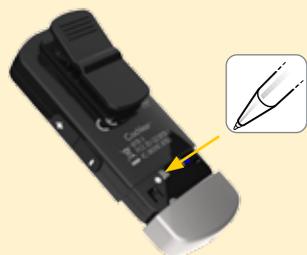
- B** フォンクリップの電源を入れ、銀色のキャップを取り外します。

電源を入れる ↓

キャップを外す ↓



- C** ペンなどの先端を使用して、フォンクリップの白色のペア設定ボタンを 1 回押します。



- D** LED ランプが 2 秒ごとに黄色に点滅し、フォンクリップが 20 秒間ペア設定モードになります。



- E** ペア設定モードが有効な間に、サウンドプロセッサの電源を入れます。

ダウンボタンを押します。

正常にペア設定されると、青色の表示ランプが短く点滅します。



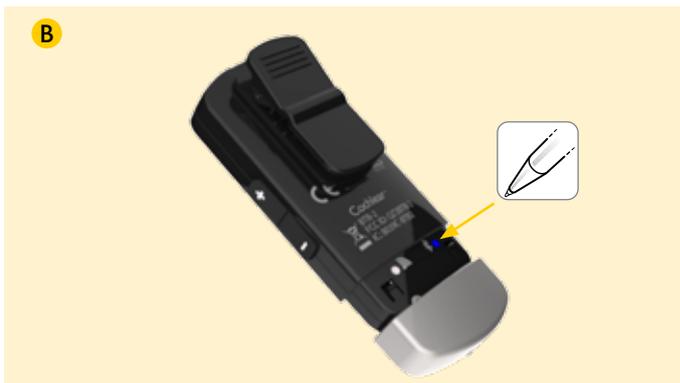
携帯電話とのペア設定

A フォンクリップの電源を入れ、銀色のキャップを取り外します。



B 携帯電話の Bluetooth 機能がオンになっていることを確認します。手順については、お使いの携帯電話の取扱説明書をご参照ください。

フォンクリップの青色の Bluetooth ペア設定ボタンを 1 回押すと、ペア設定モードが 2 分間有効になります。



C ペア設定モード中は LED ランプが青色に点灯します。



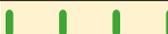
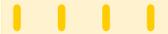
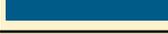
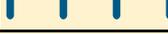
D 携帯電話で新しい Bluetooth 機器をサーチし、リストから [補聴器対応電話] を選択します。

E 携帯電話でパスコードが要求される場合は、「0000」(ゼロ 4 つ)を入力します。

F これで、Phone Clip が携帯電話とペア設定されました。もし、有効にする Bluetooth サービスを指定するよう携帯電話から要求された場合は、[ヘッドセット] を選択します。

フォンクリップの表示ランプ (LED)

フォンクリップ 上部にある LED ランプは多目的ユーザーインターフェイスとして機能し、Phone Clip の状態を知らせます。

点滅/点灯	意味
	正常動作 (緑色)
	電池残量わずか (黄色)
	充電中 (赤色)
	充電完了 - 充電器に接続されたまま (赤色/緑色)
	サウンドプロセッサとのペア設定待ち (黄色)
	Bluetooth 機器とのペア設定待ち (青色)
	Bluetooth による通話が有効 (青色)

携帯電話との接続

フォンクリップで電話に応答または発信するには、携帯電話で Bluetooth® 機能を有効にする必要があります。正常にペア設定された後、携帯電話に、フォンクリップを接続するかどうかの確認メッセージが表示されることがあります。

手動で接続する必要がある場合は、電話の Bluetooth® メニューでペア設定済みのデバイスのリストを検索します。このリストで、[補聴器対応電話] を強調表示させて、[接続] を選択します。これで、フォンクリップを使用する準備ができました。

一部の電話では、[自動再接続] を有効にすることもできます。操作方法については、お使いの携帯電話の取扱説明書をご参照ください。

ヒント: 多くの場合、携帯電話のメイン画面にヘッドセットアイコンが表示され、正常に接続されていることが確認できます。

フォンクリップの使用

電話を受ける/切るボタンによる通話の操作



- **着信:**
応答するには、1回押します。
応答しない時は、ダブルクリックします。
- **通話中:**
電話で始めた通話を Phone Clip に転送するには、1回押します。
通話を保留にするには、2秒間長押しします。
- **発信:**
最後にかけた番号をリダイヤルするには、ダブルクリックします。
音声ダイヤルを有効にするには、2秒間長押しします。

電話から音楽をストリーミング

フォンクリップを使用して、携帯電話やパソコンから音楽をストリーミングできます。

- Bluetooth を使用して、機器をフォンクリップに接続します。
- 機器で音楽を再生します。
- 機器からストリーミングされた音楽を聞くことができます。
- ストリーミングを停止するには、機器で音楽の再生を停止します。



ヒント: 音量を変更するには、フォンクリップの音量調整を使用します。

サポート

フォンクリップの詳細については、フォンクリップに同梱されている取扱説明書およびワイヤレスアクセサリ取扱説明書をご参照ください。

Cochlear CP900 シリーズ サウンドプロセッサの詳細については、サウンドプロセッサ取扱説明書をご参照ください。

サポートやビデオについては、Cochlear ウェブサイトをご覧ください: www.cochlear.com

Cochlear Wireless Accessories:

■ **Cochlear Bone Anchored Solutions AB** Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

■ **Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

■ **Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

■ **Cochlear Americas** 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

■ **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, 「Hear now. And always」, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, 中国語表記の Nucleus, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, 楕円形のロゴ, Whisper は、Cochlear Limited の商標または登録商標です。Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix, WindShield は、Cochlear Bone Anchored Solutions AB の商標または登録商標です。Bluetooth は、Bluetooth SIG の登録商標です。
© Cochlear Limited 2015

544133 ISS1

Japanese translation of 532744 ISS4 MAR15