


Cochlear™ Wireless TV Streamer (コクレアワイヤレステレビストリーマー) CP900 シリーズ装用者用クイックガイド




テレビストリーマー の機能

- テレビ、ステレオ、コンピュータなどの機器から CP900 シリーズ サウンドプロセッサに直接ストリーミングされた音声を、高品質でお楽しみいただけます。
- アナログ入力とデジタル入力の両方に対応しています。
- 部屋を離れても 5 分以内に戻れば、自動的に再接続されます。
- 設定後は何もする必要はありません。ボタンを押すだけでテレビを観ることができます。

テレビストリーマー は、一般の壁コンセントに電源を差し込み、オーディオ機器に直接接続します。テレビストリーマーを使用すると、最大 7メートル離れた場所から、サウンドプロセッサを通じてステレオサウンドをストリーミングできます。

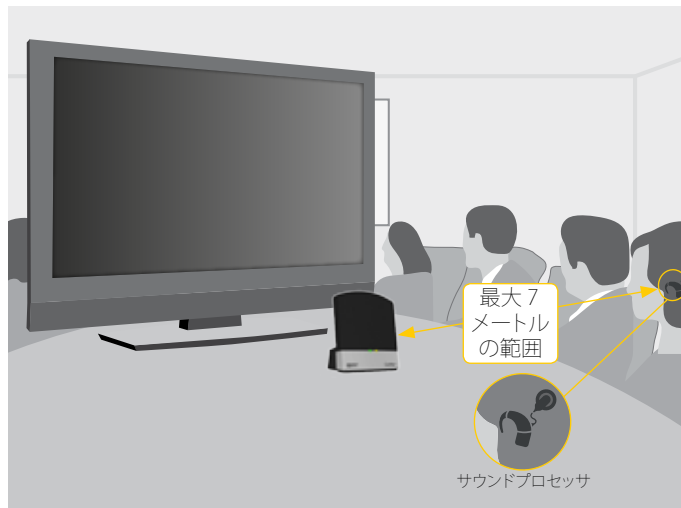

製品の概要

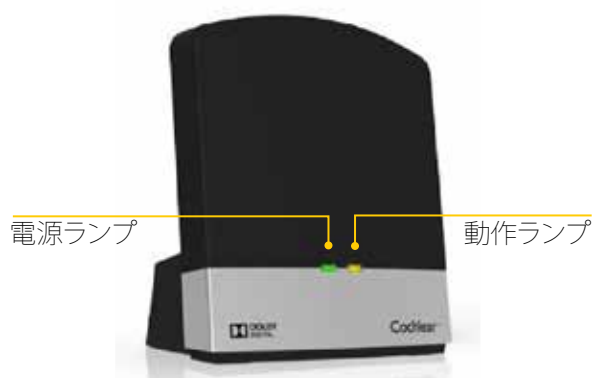

はじめに

音量の調整

方法:

音量を変更するには、テレビストリーマー の音量調整を使用します。

まず、サウンドプロセッサを最適な音量に調整した後で、テレビストリーマー の音量を調整してください。最後に設定した音量レベルが テレビストリーマー に保存されるため、この調整はたいていの場合、1 回で済みます。

モノラル/ステレオの切り替え

方法:

モノラル/ステレオスイッチを使用して、音声ストリーミングをステレオかモノラルに設定します。

サウンドプロセッサを両側装用している場合は、スイッチをステレオの位置に設定してください。


一側装用の場合、スイッチをモノラルの位置に設定してください。

CP900 シリーズ サウンドプロセッサとのペア設定

- A** テレビストリーマーの電源コードを壁コンセントに差し込み、もう片方の端をテレビストリーマーのマイクロ USB ソケットに差し込みます。



- B** オーディオケーブルをテレビストリーマーのミニジャックオーディオ入力ソケットに差し込み、オーディオ機器に接続します。

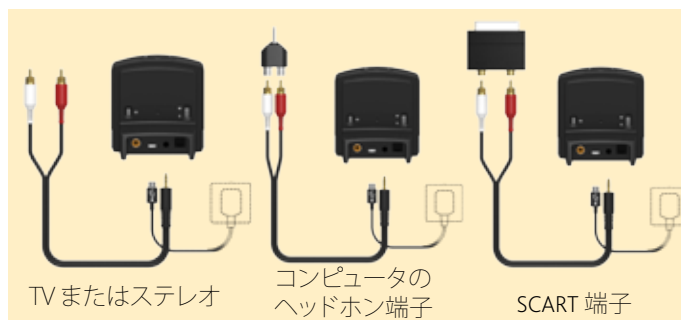


- C** CP900 シリーズ サウンドプロセッサの電源を切ります。




- D** TV Streamer のペア設定ボタンを 1 回押します。



- E** テレビストリーマーはペア設定モードになっています。

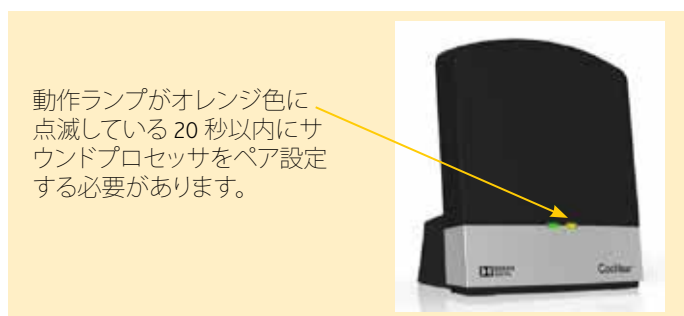

- F** ペア設定モードが有効な間に、サウンドプロセッサの電源を入れます。

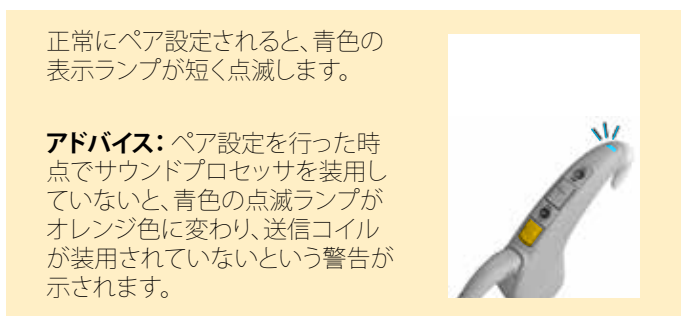

サポート

テレビストリーマーの詳細については、テレビストリーマーに同梱されている取扱説明書およびワイヤレスアクセサリ取扱説明書をご参照ください。

Cochlear CP900 シリーズ サウンドプロセッサの詳細については、サウンドプロセッサ取扱説明書をご参照ください。

サポートやビデオについては、Cochlear ウェブサイトをご覧ください: www.cochlear.com

テレビストリーマーの使用

サウンドプロセッサを使用したストリーミングの開始

A サウンドプロセッサとテレビストリーマーの電源を入れます。



サウンドプロセッサのアップボタンを1回長押しします。
音声が入力されていると、サウンドプロセッサのランプが青色に点滅します。

B 別のチャンネルを選択するか、ストリーミングを停止するには、以下のように操作します。



アップボタンをもう1回長押しするとチャンネル2、さらにもう1回長押しするとチャンネル3を選択できます。

ストリーミングを停止するには、アップボタンを短く押します。

CR230 リモートアシスタントを使用したストリーミングの開始


方法 1: サウンドプロセッサとテレビストリーマーの電源を入れます。CR230 リモートアシスタントの電源を入れます。

方法 2: サウンドプロセッサとテレビストリーマーの電源を入れます。CR230 リモートアシスタントの電源を入れます。



テレコイルボタンを長押しします。
ヒント: ボタンをもう1回長押しするとチャンネル2、さらにもう1回長押しするとチャンネル3を選択できます。
オーディオ機器の電源を入れた後、テレビストリーマーを通じて音声のストリーミングが開始されます。
ストリーミングを停止するには、テレコイルボタンを短く押します。

または

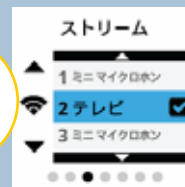

ホーム画面で、[ストリーム] 画面が表示されるまで右矢印ボタンを押します。
使用するチャンネルまでリストを下にスクロールして [OK] を押します。
オーディオ機器の電源を入れた後、テレビストリーマーを通じて音声のストリーミングが開始されます。
ストリーミングを停止するには、[ストリーミング] 選択画面で [オフ] を選択します。

CR210 リモートコントロールを使用したストリーミングの開始

A サウンドプロセッサとテレビストリーマーの電源を入れます。CR210 リモートコントロールの電源を入れます。

B 別のチャンネルを選択するか、ストリーミングを停止するには、以下のように操作します。



テレコイルボタンを長押しします。
オーディオ機器の電源を入れた後、テレビストリーマーを通じて音声のストリーミングが開始されます。



テレコイルボタンをもう1回長押しするとチャンネル2、さらにもう1回長押しするとチャンネル3を選択できます。

ストリーミングを停止するには、テレコイルボタンを短く押します。

Cochlear Wireless Accessories:

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESPrit, Freedom, 「Hear now. And always.」, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, 中国語表記の Nucleus, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, 精円形のロゴ, Whisper は、Cochlear Limited の商標または登録商標です。Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix, WindShield は、Cochlear Bone Anchored Solutions AB の商標または登録商標です。

© Cochlear Limited 2015