

Cochlear™ Wireless TV Streamer (Streamer TV)


Ghid rapid pentru utilizatorii seriei CP900




Caracteristicile streamer-ului TV

- Savurați sunetul de calitate înaltă transmis direct procesorului de sunet din seria CP900 de la televizor, echipament stereo, calculator sau alt dispozitiv similar.
- Acceptă atât intrări analogice, cât și digitale.
- Se reconectează automat, dacă părăsiți camera și reveniți în decurs de 5 minute.
- Instalați-l și uitați de el - pur și simplu faceți clic pe un buton pentru a urmări programul TV.

Streamer-ul TV se cuplează la o priză de perete obișnuită și direct la dispozitivul audio. Streamer-ul TV va emite sunetul stereo prin intermediul procesoarelor de sunet de la distanță de până la 7 metri.

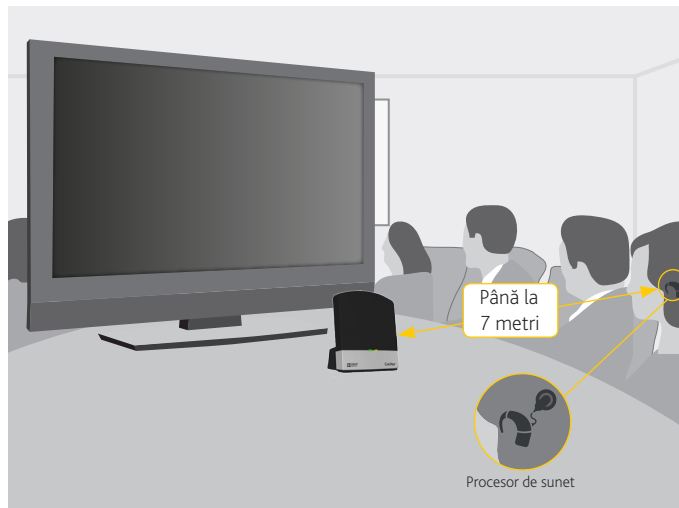

Prezentarea produsului

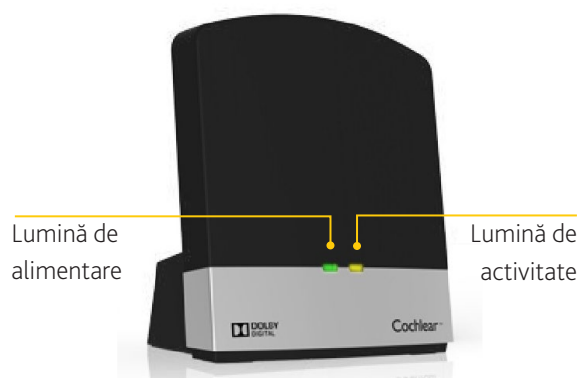

Elemente de bază

Reglarea volumului

Mod de utilizare:

Pentru a modifica volumul, utilizați controlul volumului de pe streamer-ul TV.

Verificați dacă procesoarele de sunet sunt reglate comod, înainte de a modifica setările cu ajutorul controlului volumului. În majoritatea cazurilor, trebuie să efectuați această reglare doar o dată, întrucât streamer-ul TV va stoca nivelul volumului setat cel mai recent.

Controlul mono/stereo

Mod de utilizare:

Comutatorul cu două poziții mono/stereo poate fi folosit pentru a seta emisia stereo sau mono.

La montarea bilaterală, comutatorul trebuie pus, preferabil, în poziția Stereo.


La montarea unilaterală, trebuie pus în poziția Mono.

Împerecherea cu procesorul de sunet din seria CP900


- A** Cuplați streamer-ul TV la priza de perete, folosind cablul de alimentare și mufa micro-USB a streamer-ului TV.




- B** Cuplați cablul audio la mufa mini-jackului de intrare audio de pe streamer-ul TV și conectați-l la sursa audio.

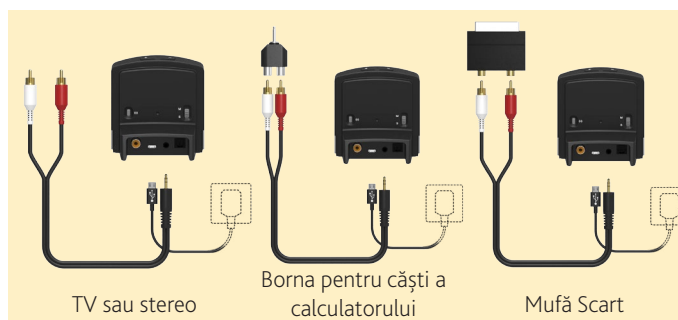

- C** Opriți procesorul de sunet din seria CP900.

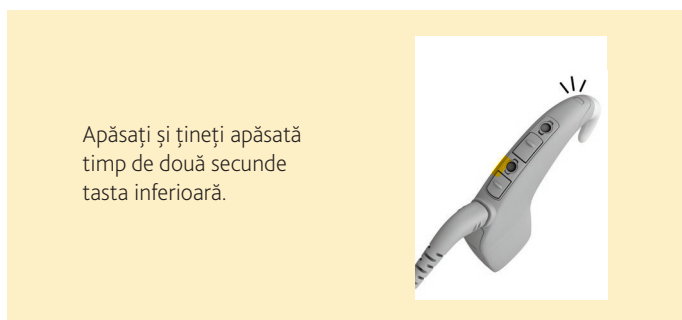


- D** Apăsați o dată pe butonul de împerechere de pe streamer-ul TV.

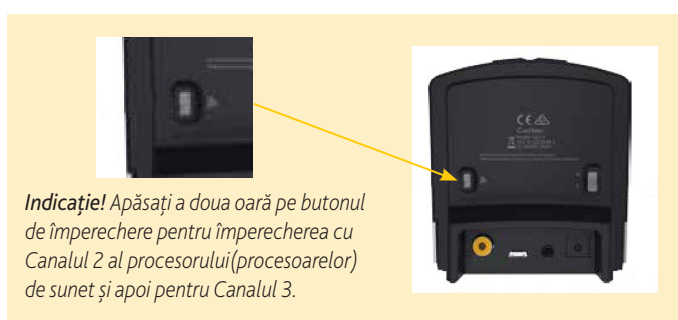


Indicație! Apăsați a doua oară pe butonul de împerechere pentru împerecherea cu Canalul 2 al procesorului (procesoarelor) de sunet și apoi pentru Canalul 3.

- E** Streamer-ul TV este în modul de împerechere.

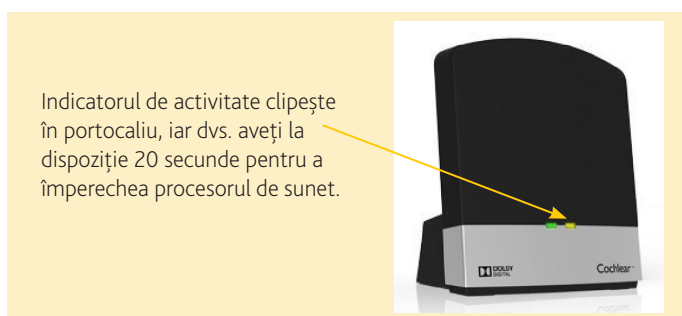

Indicatorul de activitate clipește în portocaliu, iar dvs. aveți la dispoziție 20 secunde pentru a împerechea procesorul de sunet.

- F** Când este activ modul de împerechere, porniți procesorul de sunet.

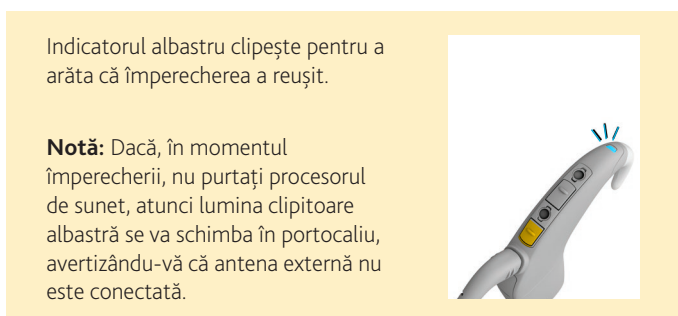

Indicatorul albastru clipește pentru a arăta că împerecherea a reușit.

Notă: Dacă, în momentul împerecherii, nu purtați procesorul de sunet, atunci lumina clipitoare albastră se va schimba în portocaliu, avertizându-vă că antena externă nu este conectată.

Suport

Pentru detalii complete despre streamer-ul TV, vă rugăm să consultați Ghidul de utilizare care a fost livrat cu streamer-ul TV și Ghidul de utilizare pentru accesoriile wireless.

Pentru detalii complete despre procesorul de sunet Cochlear din seria CP900 vă rugăm să consultați Ghidul de utilizare al acestuia.

Pentru asistență suplimentară și secvențe video, vizitați website-ul Cochlear: www.cochlear.com

Utilizarea streamer-ului TV

Începerea emisiei cu ajutorul procesorului de sunet

A Porniți procesorul de sunet și streamer-ul TV.



Apăsați o dată lung pe tasta superioară de pe procesorul de sunet.
Procesorul de sunet clipește cu o lumină albastră pentru a arăta că sunetul este emis.

B Pentru a selecta alt canal sau a opri emisia.



Apăsați lung tasta superioară a doua oară pentru a selecta Canalul 2, apoi din nou pentru Canalul 3.

Pentru a opri emisia, apăsați scurt pe tasta superioară.

Începerea emisiei cu ajutorul teleasistenței CR230

Metoda 1: Porniți procesorul de sunet și streamer-ul TV.
Porniți teleasistența CR230.



Apăsați lung pe tasta bobinei telefonice.


Indicație! Apăsați lung tasta, a doua oară, pentru a selecta Canalul 2, apoi din nou pentru Canalul 3.

Când dispozitivul audio este pornit, sunetul va începe să fie emis prin intermediul streamer-ului TV.

Pentru a opri emisia, apăsați scurt pe tasta bobinei telefonice.

SAU

Metoda 2: Porniți procesorul de sunet și streamer-ul TV.
Porniți teleasistența CR230.

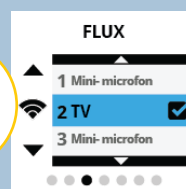

Pe ecranul Acasă apăsați pe butonul săgeată dreapta până când vedeți ecranul Flux.

Derulați în jos lista până la canalul pe care doriți să-l utilizați și apăsați pe **OK**.

Când dispozitivul audio este pornit, sunetul va începe să fie emis prin intermediul streamer-ului TV.

Pentru a opri emisia, selectați **Oprit** de pe ecranul de selectare Flux.

Începerea emisiei cu ajutorul telecomenzii CR210

A Porniți procesorul de sunet și streamer-ul TV. Porniți telecomanda CR210.



Apăsați lung pe tasta bobinei telefonice.

Când dispozitivul audio este pornit, sunetul va începe să fie emis prin intermediul streamer-ului TV.

B Pentru a selecta alt canal sau a opri emisia.



Apăsați lung tasta bobinei telefonice, a doua oară, pentru a selecta Canalul 2, apoi din nou pentru Canalul 3.

Pentru a opri emisia, apăsați scurt pe tasta bobinei telefonice.

Cochlear Wireless Accessories:

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA
Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル
Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus în caractere chinezești, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, logo-ul de formă eliptică și Whisper sunt mărci sau mărci înregistrate ale Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix și WindShield sunt mărci sau mărci înregistrate ale Cochlear Bone Anchored Solutions AB.

© Cochlear Limited 2015

544188 ISS2

Romanian translation of 532745 ISS4 MAR15