

# Kanso™ サウンド プロセッサ

クイックガイド

- ✓ はじめに
- ✓ クイックリファレンス



CP950

Hear now. And always



Cochlear®

# 概要


Cochlear™ Kanso™ サウンドプロセッサ (モデル番号: CP950) は、Cochlear 社の人工内耳インプラントの装用者が使用することにより耳に音を伝えます。



## アドバイス

詳細情報と警告については、「*Kanso* サウンドプロセッサ取扱説明書」を参照してください。

# サウンドプロセッサ

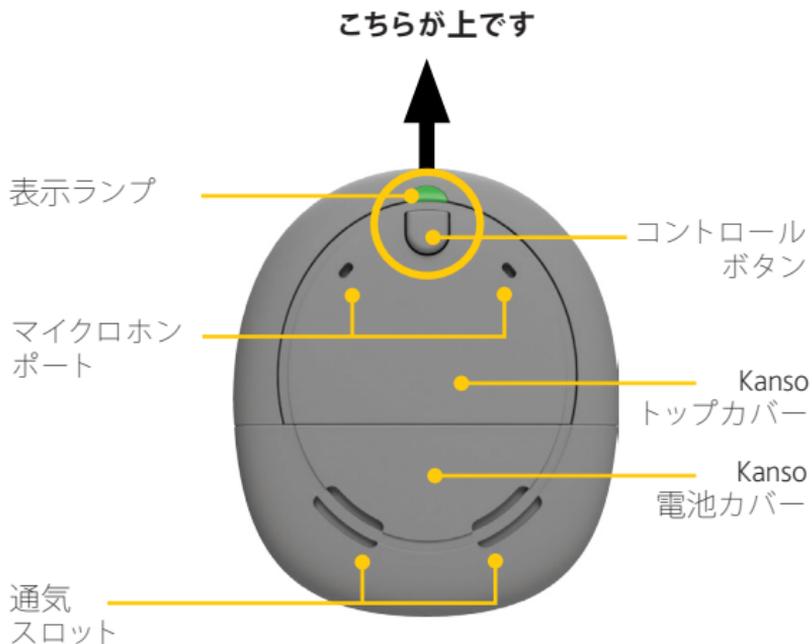

# 電池カバーのロック/ロック解除

ロックするには、保護ロックを時計回りに水平になるまで回します。



ロックされた状態




ロック解除するには、保護ロックを反時計回りに垂直になるまで回します。




ロック解除された状態


# 電池の交換

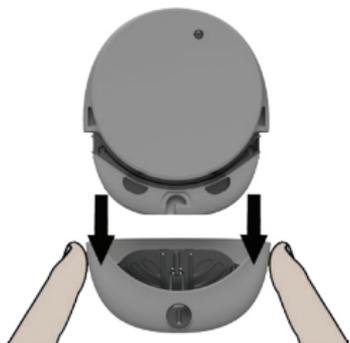

1. 保護ロックを反時計回りに回して電池カバーのロックを解除します (時計回りに回すとロックされます)。
2. スライドして開きます。  
左右の端を指でつまみ、電池カバーを引いて外します。

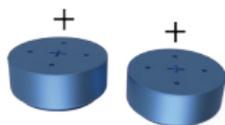

3. 2 個の新しい使い捨て p675 高出力空気亜鉛電池を平らな面を上にして挿入します。

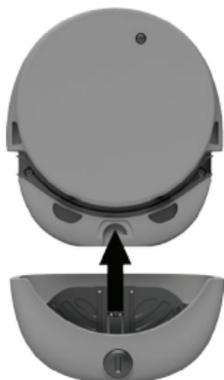


4. 電池カバーを取り付けます。  
保護ロックを時計回りに回してロックします。

# サウンドプロセッサの装用

ボタンとランプ  
が上に来るよう  
にする

電池収納部が  
下に来るよう  
にする

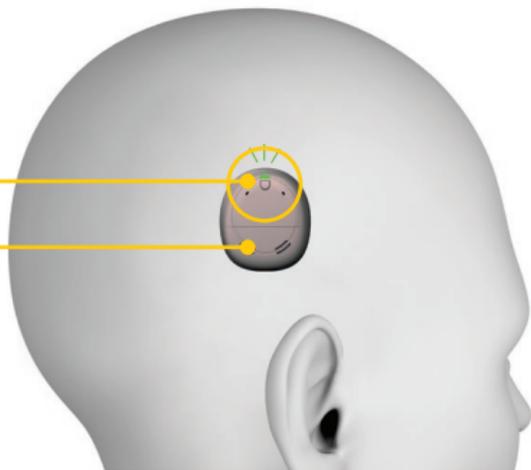

## 注意

- ・サウンドプロセッサは正しい位置と向きで装用してください。最適な聴こえを得るため、かつ、インプラント位置からの脱落を防ぐために、サウンドプロセッサを正しく装用することが重要です。
- ・インプラントを両側に装用している場合は、左右のインプラントとサウンドプロセッサを正しい組み合わせで使用してください。


# SoftWear パッド (ソフトパッド) の取り付け

不快感が生じた場合は、Cochlear SoftWear™ パッド (ソフトパッド) をサウンドプロセッサの裏面に貼って使用します。



# サウンドプロセッサの落下防止

サウンドプロセッサの紛失を防ぐために、Nucleus® 安全紐を取り付けることができます。

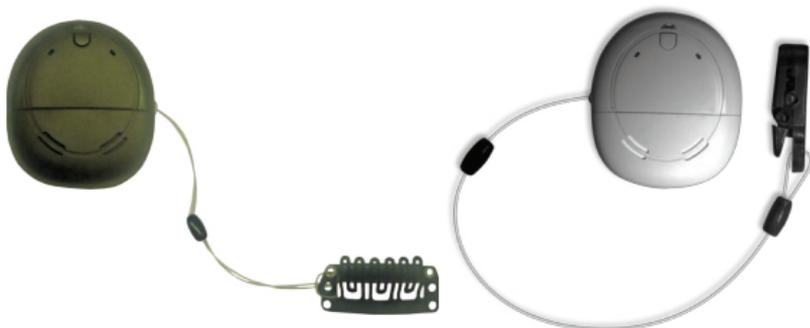


輪の部分をつまみ、前面から裏面に向かって、取り付け穴に通します。クリップを輪の中に通し、しっかり引きます。

# 電源を入れる/切る

ボタンを押すと、  
電源が**入ります**。

電源を**切る**には、  
ランプがオレンジ  
色に点灯するまで  
ボタンを長押しし  
ます。

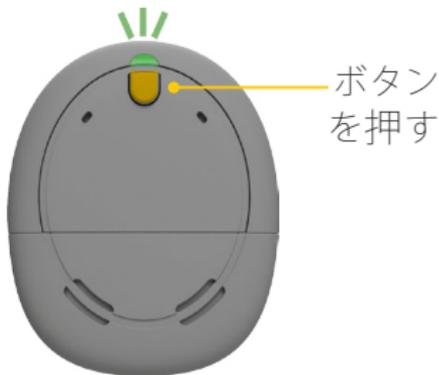


## アドバイス

サウンドプロセッサは、インプラント位置から2分以上外れていると自動的に電源が切れます。

# プログラムの変更

ボタンを押すと、  
プログラムが変更され  
ます。

アラーム音の回数ま  
たは**緑色**の点滅の回  
数 (事前に病院の先  
生による設定が必要)  
はプログラム番号を  
示します。

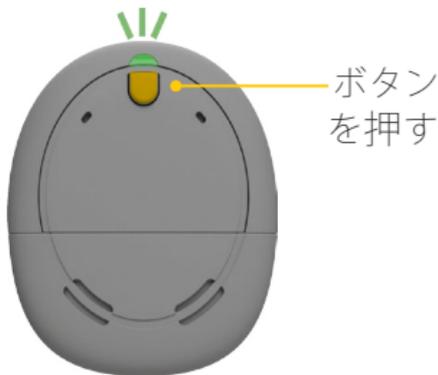


# 音声のストリーミング

**ボタンを長押し** (2 秒間) すると、外部音源からの音声  
がストリーミングされ  
ます。

次の外部音源に切り替える  
には、**ボタンをもう一度  
長押しして放します。**

**青色:** 音声をストリーミング  
しています。

ボタンを **短く押す** と、  
ストリーミングが停止します。

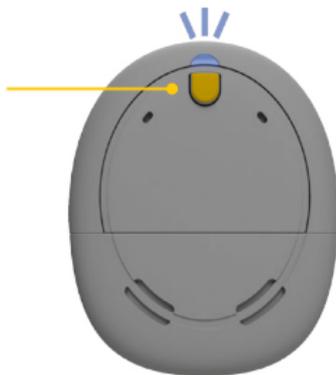

サウンドプロセッサのボタンを押すたびに、利用可能な外部音源が順番に切り替わります。

押す回数	テレコイル有効時	テレコイル無効時
1回目	テレコイル	ワイヤレスアクセサリ 1
2回目	ワイヤレスアクセサリ 1	ワイヤレスアクセサリ 2
3回目	ワイヤレスアクセサリ 2	ワイヤレスアクセサリ 3
4回目...	テレコイル...	ワイヤレスアクセサリ 1...

# ランプ

## 日常の使用時

ランプ	意味
	マイクロホンからの音声を受信している間、サウンドプロセッサの表示ランプが点滅します (小児モードのみ)。
	サウンドプロセッサを起動しています。または、プログラムを変更しています。点滅回数は現在のプログラム番号を示します。
	外部音源からの音声を受信している間、サウンドプロセッサの表示ランプが点滅します (小児モードのみ)。
	サウンドプロセッサの電源を切っています。

## 警告

ランプ	意味
	サウンドプロセッサが頭部から外れている (または誤ったインプラントに装着している) 場合、表示ランプが点滅します。
	サウンドプロセッサの電池が残りわずかです。 電池を交換してください。
	エラーです。病院の先生にご連絡ください。 問題が解決するまで点灯したままになります。

Hear now. And always



**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Americas**

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

 **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

**株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)**

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

**www.cochlear.com**

株式会社日本コクレア 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 御茶の水元町ビル

Tel : +81-3-3817-0241 Fax : +81-3-3817-0245

販売名 KANSO サウンドプロセッサ

承認番号 22900BZX00220000

Cochlear、「Hear now.And always」、Nucleus、および楕円形のロゴは、Cochlear Limited の商標または登録商標です。

© Cochlear Limited 2016

D701336 ISS1

Japanese translation of 552818 ISS1 FEB16