

CR310

リモート コントロール

クイックガイド

- ✓ はじめに
- ✓ クイック
リファレンス



Hear now. And always



概要

Cochlear™ (コクレア®) CR310 リモートコントロールは、コクレア Nucleus 7 サウンドプロセッサ (モデル番号: CP1000) のよく使う機能を手元で操作するために使用します。



アドバイス

詳細情報と警告については、『CR310 リモートコントロール取扱説明書』を参照してください。



警告

リチウム電池を飲み込むと、重大な障害または死亡につながる恐れがあります。飲み込んだ場合は、直ちに緊急治療を受けてください。子どもの手の届かない所に置いてください。使用する直前まで元のパッケージに入れたままにしてください。使用済みの電池は直ちに廃棄してください。

CR310 リモートコントロール



電池の交換

電池残量低下マークが表示されたら、電池を交換します。



1. プラスドライバーでカバールのネジを緩めます。




2. カバーを外して古い電池を取り出します。



注意

リモートコントロールでは、必ず CR2032 または 5004LC 3V の使い捨てコイン型リチウム電池を使用してください。

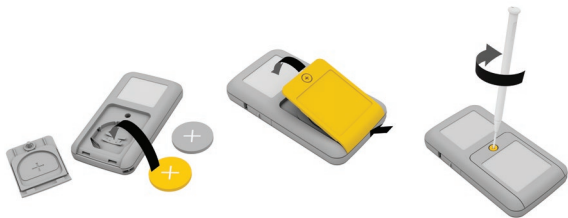

3. プラス (+) の面を上にして、新しい電池を入れます。
4. カバーの下端を差し込み、カバーを元通りに取り付けます。
5. カバーのネジを締めます。

電源を入れる

スイッチを上へスライドさせて電源を入れます。



電源を切る

スイッチを
下へスライド
させて電源を
切ります。



ペア設定

ペア設定することで、2つの機器が相互に通信できるようになります。



ディスプレイの表示が、リモートコントロールがペア設定されていない状態になっている場合:

1. サウンドプロセッサとリモートコントロールの電源をいったん切ってから、再度入れます。
2. 送信コイルをリモートコントロールの裏面に当てます。



3. リモートコントロールのディスプレイに、ペア設定が進行中であることが表示されます。
4. ペア設定されたことが表示されます。
5. 2つ目のサウンドプロセッサがある場合は、1～4の手順を繰り返します。

プログラムの変更



音量/感度の調整



音量または感度
(使用可能な場合)を
上げる

音量または感度を
下げる

ワイヤレスアクセサリ

コクレア True Wireless™ (トゥルーワイヤレス) アクセサリ(ミニマイクロホンまたはテレビストリーマー)をサウンドプロセッサとペア設定すると、リモートコントロールを使って音声のストリーミングを開始/停止できます。

ディスプレイにワイヤレスアクセサリが表示されている:

ストリーミングを開始する:

ストリーミングを停止する:



1回長押しします。



1回短く押します。

FM 補聴援助システム

サウンドプロセッサに FM 補聴援助システムが接続されている場合、リモートコントロールを使って FM 補聴援助システムの機能をオフ/オンできます。

ディスプレイに FM 補聴援助システムが表示されている:



FM 補聴援助システムをオフにする:



1 回短く
押します。

FM 補聴援助システムをオンにする:



1 回短く
押します。

クイックガイド

テレコイル

テレコイルを使用して、ヒアリンググループからの音声を聞くことができます。

テレコイルを
オンにする:



1回短く
押します。

テレコイルを
オフにする:



1回短く
押します。

お手入れ

乾いた柔らかい布でリモートコントロールを拭きます。

リモートコントロールを濡らさないでください。



Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

 **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG**

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

販売名: N u c l e u s 7 サウンドプロセッサ

承認番号: 23000BZX00310000

本取扱説明書には医療機器に該当しない製品も含まれます。

Cochlear、「Hear now. And always」、Nucleus、および楕円形のロゴは、

Cochlear Limited の商標または登録商標です。

© Cochlear Limited 2017

D817711 ISS2

Japanese translation of 594632 ISS2 APR17